

Bukkaaliputken ohjeet

Tuotteen nimi: Bukkaaliputki

Käyttötarkoitus:

Bukkaaliputkea käytetään oikomishoitoon. Kiinnitä bukkaaliputki kliinisessä toiminnassa hampaiden kasvoille syöttämällä tukivoima oikomishoidon avulla hampaiden kohdistamisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Tuotteen toiminto:

Oikomishoito on pitkä ja hidaskäyttöprosessi tämän prosessin aikana; se vaatii ammattilaisen z hammaslääkärin käsittelyä YK-sileä hampaat useita menetelmiä, jotta hampaat liikkuvat oikeaan asentoon. Ammattiläkärit käyttävät oikomishoidon tuotteita, kuten oikomishoidon kannakkeita, bukkaaliputkia ja ortodontisia rengasbukkaaliputkia, kohdistamaan erilaisia ortodontisia voimia hampaisiin siirtääkseen hampaat oikeaan asentoon ja saavuttaakseen kohdentamistavoitteen. Kliiniset oikomishoidot käyttävät sitä ihmisen hampaiden oikomishoitoon.

Tuotetyyppi, erittely:

Bukkaaliputkimallit on jaettu kahteen tyyppiin: suora- ja Edgewise-putket . Tekniset tiedot ovat syrjällä hitsattavissa putki , syrjällä hitsattava putki A-tyypin putki , hitsattavat suora -W IRE putki , hitsattavat suora-Wire Roth, ja hitsattava suora-Wire McBeTr, sidottavissa syrjällä putki, sidottavissa syrjällä A-tyypin, sidottavissa suora-Wire putki , sitoutuva suora -Wire Roth, sidottava suora lanka McBeTr.

Eri kliinisten oikomishoidon käsitteiden ja järjestelmien mukaan se on jaettu kahteen tyyppiin: Edgewise ja straight-Wire. Kukin tuotetyyppi on jaettu erilaisiin eritelmiin sen kiinnitystavan hampaiden ja kolmiulotteisen koon vuoksi.

Tuottaa suorituskykyä:

1. Bukkaalinen putki on noin hitsattavissa voimaa.
2. Bukkaaliputkimateriaali on ruostumattomasta teräksestä valmistettua tankoa 17-4ph, 304 ruostumatonta terästä (06Cr19Ni10), GB / t1220-2007 -standardin mukaisesti, hyvällä biologisella yhteensopivuudella.
3. Emalipinnan pidätyslujuuden tulisi olla vähintään 30 N, kun bukkaaliputkea käytetään tarttuvan emalin kanssa.

Asennus- ja käyttöohje (Bondable bukkaaliputki):

1. Tuotetta käyttää ammattilaisen hammaslääkäri vasta koulutuksen jälkeen.
2. Puhdista ennen käyttöä hampaiden pinta, poskiputken pohja ja desinfioi tuote.
3. Piirrä erikoistunut liima tasaisesti hampaiden pinnalle ja bukkaaliputken pohjaan.
4. Aseta bukkaaliputki hampaiden pintaan oikein, kiinnitä sen jälkeen kun liima reagoi.
5. Jokaista bukkaaliputkea käytetään nimettyyn hampaaseen, muuten se ei saavuta haluttua vaikutusta, vaikka se aiheuttaisi okklusaalisen häiriön.

6. Hoidon aikana bukkaaliputki saattaa pudota, kun korjata, sen pitäisi valita tuote, jolla on sama spesifikaatio samassa valmistuksessa.
7. Hoidon jälkeen bukkaaliputki on poistettava kliinisen hammaslääkärin ohjauksessa tarpeettomien vammojen välttämiseksi.

Asennus- ja käyttöohje (hitsattava bukkaaliputki):

1. Tuotetta käyttää ammattilaisen hammaslääkäri vasta koulutuksen jälkeen.
2. Hammaslääkärin tulisi hitsata hitsattava bukkaaliputki nauhoihin, jotta se voidaan tehdä oikomishoidettaviin esihitsaettaviin bukaaliputkeen.
3. Puhdista ennen käyttöä hampaiden pinta, ortodontisten nauhojen putken sisäosa ja desinfioi tuote.
4. Piirrä erikoistunut liima tasaisesti ortodontisten nauhojen putken sisäpinnalle.
5. Aseta esihitsattavat nauhat putkeen hampaiden päälle ja kiinnitä liiman reagoinnin jälkeen.
6. Jokaista nauhan bukkaaliputkea käytetään määrättyyn hampaaseen, muuten se ei saavuta toivottua vaikutusta, vaikka se aiheuttaisi okklusaalisen häiriön.
7. Hoidon aikana nauhojen bukkaaliputki saattaa pudota alas, kun korjata, sen pitäisi valita tuote, jolla on sama spesifikaatio samassa valmistuksessa.
8. Hoidon jälkeen nauhojen bukkaaliputki on poistettava kliinisen hammaslääkärin ohjauksessa tarpeettomien vammojen välttämiseksi.
9. Oikomishoidon lisälaitteet saavat hitsata nauhaputkeen, mutta niiden on varmistettava, että hitsauslujuus putoamisen estämiseksi.

Erityyppisten huomioiden käyttö, spesifikaatiotuotteet:

1. Hitsattavassa reunassa olevassa bukkaaliputkessa ei ole ennalta asetettua kulmaa, ja sen pohja on sileä, joten se on hitsattava nauhoille ja taivuttava erilaisia silmukoita oikomishoitokaaran johtimiin, jotta jokainen hammas on oikeassa asennossa ja kulma.
2. Hitsattavalla Roth & MBT bukkaaliputkella on ennalta asetettu kulma ja sen pohja on sileä, joten se on hitsattava nauhoille, mutta se poistaa silmukoiden taivuttamisen tarpeet, yksi kaarilanka perusmuodolla voi tehdä jokaisesta hampaasta kohdistaa oikeaan asentoon.
3. Liitettävällä reunan bukkaaliputkella on verkkomaisen rakenteen muoto, joten sen täytyy vain tarttua suoraan hampaan pintaan, mutta sillä ei ole ennalta asetettua kulmaa, joten se vaatii hammaslääkäriä taivuttamaan silmukan kaarijohtimiin tehdä jokaisesta hampaasta oikea asento ja kulma.
4. Sitoutuvalla Roth & MBT buccal -putkella on verkkomaisen rakenteen muoto, joten sen täytyy vain tarttua suoraan hampaan pintaan, mutta sillä on ennalta asetettu kulma, joten se poistaa silmukoiden taivuttamisen tarpeet, yhden kaarijohdon perusmuoto voi saada jokaisen hampaan kohdistumaan oikeaan asentoon.

Huomio:

1. Desinfioi ennen käyttöä.

Normaalisti puhdista tai pyyhi alkoholilla muuttamatta väriä puhdistuksen jälkeen, eivätkä ne vaikuta oikomishoitoon.

2. Älä syö kovaa ruokaa, kun käytät bukkaaliputkea, jotta vältät buccaltube-putoamisen.
3. Tuote on vain kertakäyttöinen, älä käytä toistuvasti.



Vasta:

Ruostumattomasta teräksestä herkkien ihmisten on käytettävä varoen.

Mark:




Tuote on vain kertakäyttöinen, älä käytä sitä uudelleen.

Säilytysmenetelmä: Säilytetään syövyttämättömässä kaasussa, ilmanvaihtoympäristössä.

Voimassaoloaika: Tuotteen ehdot ovat 3 vuotta, tarkista pakkauksen eränumero tuotantopäivästä.

Versio: A / 2

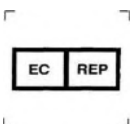

Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10, le Verdissä, 2595AA,

Haag, Alankomaat

Sähköposti: peter@lotusnl.com

Puh: +31644168999



Innovatiivinen materiaali ja laitteet, Inc.

Rakennus # 5, No.615, Fengdeng Road, Jiading District, Shanghai

Puh: 86-21-59156556 Faksi: 86-21-59156686

www.imdmedical.com