

Fogszabályozó csipesz használati útmutató

Termék neve: Fogszabályozó fogó

Alkalmazási terület: az ívhuzal vagy az összekötő huzal vágására, rögzítésére, hajlítására, a rögzítő konzolok, szalaghurkok stb. eltávolítására használják a fogszabályozó kezelés során

Termékmodell specifikáció:

A fogszabályozó fogók két típusra oszthatók: berakott és nem berakott. A fej alakja szerint osztályozott modelleket az alábbi táblázat mutatja:

Sorozatszám	Modell	Sorozatszám	Modell
1	Végezze el a fogó vágását	22	Három csőrfogó
2	Hosszú markolatú vágófogó	23	Vastag huzalvágó fogó
3	Izzóvágó fogó	24	V alakú fogó
4	Hosszú markolatú vágófogó	25	Trapéz félhold fogó
5	Végezze el a fogó vágását	26	Nyomatékképző fogó
6	Szálképző fogó	27	Többfunkciós fogó
7	Szálképző szalagvágó fogó	28	Bukkális cső dekapír fogó
8	Kis nap holdfogó	29	Osztógyűrű fogó
9	Ingyenes horogszorító fogó	30	Kétfélgű nyomatékfogó
10	Konzol eltávolító fogó	31	Egyfejű nyomatékfogó
11	Hosszú fejtartó eltávolító fogó	32	Függőleges fogó
12	A hátsó konzol eltávolító csipeszei	33	Vízszintes fogó
13	KIM fogó	34	Könnycsepp csipeszek

14	Gyűrű eltávolító fogó	35	Lyukasztó fogó (6mm)
15	Hosszú fejpánt gyűrű eltávolító fogó	36	Lyukasztófogó (3mm)
16	Vége hajlító fogó	37	Tartó csipesz
17	Trapéz fogó	38	Bukkális csőfogó
18	Hor csipesze	39	Tűfogó fogó
19	Kötőanyag-eltávolító fogó	40	Formázó fogó gyűrűvel
20	Nikkel-titán hajlító fogó	41	Vontatóhorog speciális fogó
21	Függőleges hajlító fogó	42	Kapocs

termék szerkezete:

Általában a fogócsőrből, az ízületekből és a fogófogantyúból áll. A fogók állkapcsait a rendeltetésüknek megfelelően különböző formában készíthetjük, és általában rozsdamentes acélból készülnek. Nem steril.

A termék teljesítménye:

A fogszabályozó csipeszek olyan klinikai segédeszközök, amelyeket az orvosok gyakran használnak a fogszabályozó kezelés során. A fogszabályozó fogókkal a fogszabályozó ívhuzalok hajlíthatók vagy vágthatók, a rögzített konzolok vagy szalaghurkok eltávolíthatók, gumiszalagok vagy szabad horgok helyezhetők el.

Ellenjavallatok:

nem.

Utasítás

1. A fogszabályozó fogókat szakmailag képzett fogorvosoknak kell használniuk;
2. Kicsomagolás után az új terméket fertőtleníteni kell. Az ajánlott fertőtlenítési módszer a nyomás alatti gőzsterilizálás, vagyis a hőmérséklet 132 ~ 134 °C, az idő pedig 4 perc.

Óvintézkedések:

Fertőtlenítse a fogszabályozó fogót használat előtt és után a keresztfertőzés megelőzése érdekében.

Győződjön meg arról, hogy a műszer felülete száraz. A nedvesség által okozott hosszú távú erózió olyan problémákat okoz, mint a bilincs testének elszíneződése és rozsdásodása.

Ha sorját, repedést stb. Talál a fogszabályozó csipesz felületén, hagyja abba a használatát.

Ha a pengékkel ellátott fogszabályozó csipeszeket egy ideig használják, ha unalmasak, hagyja abba a használatukat.

Csak fogszabályozó használatra szolgál. A nem szándékos használat tilos.

Karbantartási utasítások

Használat előtt és után sterilizáljon vákuum nyomású gőzsterilizáló szekrényt, és ne érintkezzen maró anyagokkal.

Tárolási feltételek


Szobahőmérsékleten kell tárolni, a relatív páratartalom nem haladja meg a 80% -ot, nincs maró gáz, és jól szellőztetett helyiségben.

Garancia időszak:

A fogszabályozó fogó a gyárból való kilépés dátumától számítva öt évig garantált, a tárolás, szállítás, tárolás és használat szabályainak betartása mellett. A gyártás dátuma és a gyártási tétel száma a csomagolás címkéjén található.

Összeállítás dátuma: 2019. november 18. Verziószám: A / 0 2019

Mark:

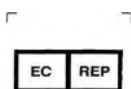

Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10, le Verd, 2595AA,

The Hague, Netherlands

E-mail: peter@lotusnl.com

Tel: +31644168999



Innovative Material and Devices, Inc

Building #5, No.615, Fengdeng Road, Jiading District, Shanghai

Tel: 86-21-59156556 Fax: 86-21-59156686

www.imdmedical.com

Amikor a vállalat benyújtja a termékleírást és az értékesítési egység címkéjének minimális mintáját, a következő kötelezettségeket vállalja:

A vállalat azt ígéri, hogy betartja az Állami Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal „Hirdetmény az I. osztályú orvostechnikai eszközök bejelentésével kapcsolatos ügyeiről” című közleményét (2014. évi 26. közlemény) „A termék kézikönyve és a minimális értékesítési egységek címkézési mintái”. , Jelölje meg a rekordszámot az orvostechnikai eszköz kézikönyvében és a címkén.

A vállalat ígéri: Az orvostechnikai eszközök kézikönyve és a címke kialakítása megfelel a törvényeknek és előírásoknak.

Innovative Material and Devices, Inc.

2019. október 18