

Instrucțiuni ale tubului bucal

Denumirea produsului: Tub bucal

Utilizarea prevăzută:

Tubul bucal este utilizat pentru tratamentul ortodontic. În operația clinică, fixați tubul bucal pe fața dinților, furnizând forța de susținere folosind pentru tratamentul ortodontic, astfel încât să atingeți scopul alinierii dinților.

Funcția produsului:

Tratamentul ortodontic este un proces lung și lent, în timpul acestui proces; aceasta necesită profesional z dentist pentru a face față cu dinții un-neted cu mai multe metode, astfel încât să se facă dinții se deplasează în poziția corectă. Medicii profesioniști folosesc produse ortodontice, cum ar fi consolele ortodontice, tuburile bucale și tuburile bucale inelare ortodontice pentru a aplica diferite tipuri de forțe ortodontice pe dinți, astfel încât să mute dinții în poziția corectă și să atingă scopul alinierii. Este utilizat de ortodoniști clinici pentru tratamentul ortodontic al dentiției umane.

Tipul produsului, specificații:

Modelele de tub sunt împărțite în vestibulare două tipuri: Straight-Wire și tub Edgewise . Specificațiile includ Edgewise tub sudabil , Edgewise sudabile Un tub de tip tub , sudabile drept -W IRE tub , sudabile drept-Wire Roth și sudabile drepte Wire McBeTr, bondable tub Edgewise, bondable tip Edgewise A, drept-Wire bondable tub , drept bondable -Wire Roth, legabil McBeTr cu fir drept.

Conform diferitelor concepte și sisteme de tratament ortodontic clinic, acesta este împărțit în două tipuri: Edgewise și straight-Wire. Fiecare tip de produs este împărțit în specificații diferite datorită modului în care este fixat pe dinți și a dimensiunii tridimensionale.

Produce performanță:

1. Tubul bucal are o anumită rezistență sudabilă.
2. Materialul tubului bucal este de 17-4ph, oțel inoxidabil 304 (06Cr19Ni10), în conformitate cu prevederile tije de oțel inoxidabil GB / t1220-2007, cu o bună biocompatibilitate.
3. Rezistența retentivă a suprafeței smalțului nu trebuie să fie mai mică de 30N atunci când tubul bucal este utilizat cu smalț adhesiv.

Manual de instalare și de utilizare (tub bucal bondabil):

1. Produsul este utilizat de către medicul dentist profesionist numai după antrenament.
2. Înainte de utilizare, vă rugăm să curățați suprafața dinților, baza tubului bucal și dezinfectați produsul.
3. Scriburiți adezivul specializat în mod uniform pe suprafața dinților și pe baza tubului bucal.

4. Puneți tubul bucal în suprafața dinților corect, fixați-l după ce adezivul reacționează.
5. Fiecare tub bucal este utilizat pentru dintele desemnat, altfel nu va atinge efectul dorit, ba chiar va provoca tulburarea ocluzală.
6. În timpul tratamentului, tubul bucal poate cădea, atunci când se repară, ar trebui să aleagă produsul cu aceeași specificație în aceeași fabricare.
7. După tratament, îndepărtarea tubului bucal trebuie făcută sub direcția medicului dentist clinic pentru a evita rănirea inutilă.

Manual de instalare și de utilizare (tub bucal sudabil):

1. Produsul este utilizat de către medicul dentist profesionist numai după antrenament.
2. Medicul dentist trebuie să sudeze tubul bucal sudabil pe benzi pentru a ajunge la tubul bucal interzis pre-sudabil ortodontic.
3. Înainte de utilizare, vă rugăm să curățați suprafața dinților, interiorul tubului de benzi ortodontice și dezinfectați produsul.
4. Scriburiți adezivul specializat în mod uniform pe fața interioară a tubului de benzi ortodontice.
5. Puneți benzile pre-sudabile pe dinți, fixați-le după ce adezivul reacționează.
6. Fiecare bandă a tubului bucal este utilizată pentru dintele desemnat, altfel nu va atinge efectul dorit, ba chiar va provoca tulburarea ocluzală.
7. În timpul tratamentului, benzile tubului bucal pot cădea, atunci când se repară, ar trebui să aleagă produsul cu aceeași specificație în aceeași fabricare.
8. După tratament, îndepărtarea benzilor tubului bucal trebuie făcută sub direcția medicului dentist clinic pentru a evita rănirea inutilă.
9. Accesoriile ortodontice au voie să se sudeze pe benzi-tub, dar ar trebui să se asigure că rezistența la sudare pentru a evita căderea.

Utilizarea atenției de diferite tipuri, specificații produse:

1. Tubul bucal sudabil orizontal nu are unghiul prestabilit, iar baza sa este netedă, așa că trebuie sudat pe benzi și îndoii feluri de bucle pe firele arcului ortodontic pentru a face fiecare dinte pe poziția corectă și unghi.
2. Tubul bucal sudabil Roth & MBT are unghiul prestabilit, iar baza sa este netedă, deci trebuie sudat pe benzi, dar elimină nevoile de îndoire a buclilor, un fir de arc cu forma de bază poate face fiecare dinte pentru a se alinia la poziția corectă.
3. Tubul bucal legabil în formă de margine are formatul structurii reticulare, deci trebuie doar să se lipească direct pe fața dintelui, dar nu are unghiul prestabilit, așa că este nevoie ca dentistul să îndoie bucla pe firele arcului pentru a face fiecare dinte pe poziția și unghiul corect.
4. Tubul bucal Roth & MBT care poate fi legat are formatul structurii reticulare, deci trebuie doar să se lipească direct pe fața dintelui, dar are unghiul prestabilit, așa că îndepărtează nevoile de îndoire a buclilor, un fir de arc cu forma de bază poate face ca fiecare dinte să se alinieze la poziția corectă.

Atenție:

1. Dezinfectați înainte de utilizare.
Curățați normal sau ștergeți cu alcool, fără nicio schimbare de culoare după curățare, și nu va afecta efectul ortodontic.
2. Nu mâncați mâncarea tare atunci când utilizați tubul bucal pentru a evita căderea buccaltubului.
3. Produsul este de unică folosință, vă rugăm să nu îl utilizați în mod repetat.

**Contraindicație:**

Persoanele sensibile la oțel inoxidabil trebuie să fie utilizate cu precauție.


Marcă:

Produsul este de unică folosință, vă rugăm să nu îl refoșiți.

Metoda de conservare: Depozitată în gaz necoroziv, în mediu de ventilație.

Perioada de valabilitate: Condițiile produsului sunt de 3 ani, vă rugăm să verificați numărul lotului de pe ambalaj pentru data de producție.

Versiune: A / 2

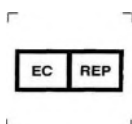

Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, le Verd, 2595AA,
Haga , Olanda
E-mail: peter@lotusnl.com
Tel: +31644168999



Materiale și dispozitive inovatoare, Inc
Clădirea nr. 5, nr. 615, drumul Fengdeng, districtul Jiading, Shanghai
Tel: 86-21-59156556 Fax: 86-21-59156686
www.imdmedical.com