

Instructions de tube buccal

Nom du produit : tube buccal

Utilisation prévue :

Le tube buccal est utilisé pour le traitement orthodontique. En opération clinique, fixez le tube buccal sur la face des dents, en fournissant la force d'appui utilisée pour le traitement orthodontique, de manière à atteindre le but d'aligner les dents.

Fonction du produit :

Le traitement orthodontique est un processus long et lent, au cours de ce processus ; il faut le professionnel z dentiste pour traiter avec les dents un-lisse avec plusieurs méthodes, de manière à rendre les dents se déplacent dans la bonne position. Les médecins professionnels utilisent des produits orthodontiques tels que des brackets orthodontiques, des tubes buccaux et des tubes buccaux annulaires orthodontiques pour appliquer divers types de forces orthodontiques sur les dents, afin de déplacer les dents dans la bonne position et d'atteindre l'objectif d'alignement. Il est utilisé par les orthodontistes cliniques pour le traitement orthodontique de la dentition humaine.

Type de produit, spécification :

Les modèles de tube buccal sont divisés en deux types : tube droit et tube à bord . Les spécifications comprennent Edgewise tuyau soudable , Edgewise tuyau soudable Un type tubulaire , pouvant être soudé directement -Wire le tube , soudable droite-Wire Roth et droite-Wire McBeTr soudable, liable tube Edgewise, liable Edgewise Un type, linéaire fil collable tuyau , directement soudable -Wire Roth, fil droit liable McBeTr.

Selon différents concepts et systèmes de traitement orthodontique clinique, il est divisé en deux types : Edgewise et straight-Wire. Chaque type de produit est divisé en différentes spécifications en raison de la manière dont il est fixé aux dents et de la taille tridimensionnelle.

Produire des performances :

1. Le tube buccal a une certaine résistance soudable.
2. Le tube buccal est en acier inoxydable 17-4ph, 304 (06Cr19Ni10), conformément aux dispositions de la tige en acier inoxydable GB/t1220-2007, avec une bonne biocompatibilité.
3. La force de rétention de la surface de l'émail ne doit pas être inférieure à 30 N lorsque le tube buccal est utilisé avec un adhésif d'émail.

Manuel d'installation et d'utilisation (Tube buccal bondable) :

1. Le produit n'est utilisé par le dentiste professionnel qu'après la formation.
2. Avant utilisation, veuillez nettoyer la surface des dents, la base du tube buccal et désinfecter le produit.
3. Griffonner uniformément l'adhésif spécialisé sur la surface des dents et la base du tube buccal.

4. Insérez correctement le tube buccal dans la surface des dents, fixez-le après la réaction de l'adhésif.
5. Chaque tube buccal est utilisé pour la dent désignée, sinon il n'obtiendra pas l'effet escompté, voire provoquera le trouble occlusal.
6. Pendant le traitement, le tube buccal peut tomber, lors du raccommodage, il faut choisir le produit avec les mêmes spécifications dans la même fabrication.
7. Après le traitement, le retrait du tube buccal doit être effectué sous la direction du dentiste clinique pour éviter les blessures inutiles.

Notice d'installation et d'utilisation (Tube buccal soudable) :

1. Le produit n'est utilisé par le dentiste professionnel qu'après la formation.
2. Le dentiste doit souder le tube buccal soudable aux bandes pour le rendre au tube buccal orthodontique pré-soudable sans bandes.
3. Avant utilisation, veuillez nettoyer la surface des dents, l'intérieur du tube des bandes orthodontiques et désinfecter le produit.
4. Griffonner uniformément l'adhésif spécialisé sur la face interne du tube de bandes orthodontiques.
5. Mettre le tube de bandes pré-soudables sur les dents, fixer après réaction de l'adhésif.
6. Chaque tube buccal de bandes est utilisé pour la dent désignée, sinon il n'obtiendra pas l'effet escompté, même cela provoquera le trouble occlusal.
7. Pendant le traitement, les bandes du tube buccal peuvent tomber, lors du raccommodage, il faut choisir le produit avec les mêmes spécifications dans la même fabrication.
8. Après le traitement, le retrait des bandes du tube buccal doit être effectué sous la direction du dentiste clinique pour éviter les blessures inutiles.
9. Les accessoires orthodontiques sont autorisés à souder sur les bandes-tube, mais doivent s'assurer de la résistance de la soudure pour éviter la chute.

L'utilisation de l'attention de différents types, spécifications des produits :

1. Le tube buccal soudable sur le bord n'a pas l'angle prédéfini et sa base est lisse, il doit donc être soudé sur les bandes et plier des sortes de boucles sur les arcs orthodontiques pour que chaque dent soit dans la bonne position et angle.
2. Le tube buccal soudable Roth & MBT a un angle pré-réglé et sa base est lisse, il doit donc être soudé sur les bandes, mais il supprime le besoin de plier les boucles, un arc avec la forme de base peut faire chaque dent pour aligner à la bonne position.
3. Le tube buccal à coller sur le bord a le format de structure réticulaire, il suffit donc de coller directement sur la face de la dent, mais il n'a pas l'angle prédéfini, il faut donc que le dentiste plie la boucle sur les arcs pour faire chaque dent sur la position et l'angle corrects.
4. Le tube buccal Roth & MBT à coller a le format de structure réticulaire, il suffit donc de coller directement sur la face de la dent, mais il a l'angle pré-réglé, il supprime donc le besoin de plier les boucles, un arc avec la forme de base peut faire en sorte que chaque dent s'aligne à la bonne position.

Attention:

1. Désinfecter avant utilisation.
Nettoyage normal ou essuyage avec de l'alcool, sans aucun changement de couleur après le nettoyage, et n'affectera pas l'effet orthodontique.
2. Ne mangez pas les aliments durs lorsque vous utilisez le tube buccal pour éviter la chute du tube buccal.
3. Le produit est uniquement jetable, veuillez ne pas l'utiliser à plusieurs reprises.

**Contre-indication :**

Les personnes sensibles à l'acier inoxydable doivent l'utiliser avec prudence.


Marque:

Le produit est uniquement jetable, veuillez ne pas le réutiliser.

Méthode de conservation : Stocké dans un gaz non corrosif, environnement de ventilation.

Période de validité : La **durée** du produit est de 3 ans, veuillez vérifier le numéro de lot sur l'emballage pour la date de production.

Version : A/2

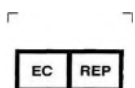

Lotus NL BV
Koningin Julianaplein 10,le Verd,2595AA,
La Haye , Pays - Bas
E-mail: peter@lotusnl.com
Tél: +31644168999



Matériel et dispositifs innovants, Inc
Bâtiment #5, No.615, Fengdeng Road, Jiading District, Shanghai
Tél. : 86-21-59156556 Téléc. : 86-21-59156686
www.imdmedical.com