

Instruções do tubo bucal

Nome do produto: tubo bucal

Uso pretendido:

O tubo bucal é usado para tratamento ortodôntico. Na operação clínica, fixe o tubo vestibular na face dos dentes, fornecendo a força de suporte utilizada para o tratamento ortodôntico, de forma a atingir o objetivo de alinhar os dentes.

Função do produto:

O tratamento ortodôntico é um processo longo e lento, durante este processo; requer que o profissional z dentista lide com os dentes não lisos com vários métodos, de modo a fazer com que os dentes se movam para a posição correta. Os médicos profissionais utilizam produtos ortodônticos, como braquetes ortodônticos, tubos bucais e tubos bucais de anel ortodôntico para aplicar vários tipos de forças ortodônticas nos dentes, de modo a mover os dentes para a posição correta e atingir o objetivo do alinhamento. É usado por ortodontistas clínicos para o tratamento ortodôntico da dentição humana.

Tipo de produto, especificação:

Os modelos de tubo bucal são divididos em dois tipos: tubo reto e tubo afiado . Especificações incluem Edgewise tubo soldável , Edgewise soldável tubo Um tipo de tubo , em linha reta soldável -W ira tubo , soldável linear fios Roth, e soldável linear fios McBeTr, ligável tubo Edgewise, ligável tipo Edgewise A, ligável linear fios tubo , linear ligável -Fio Roth, McBeTr de fio reto ligável.

De acordo com diferentes conceitos e sistemas de tratamento ortodôntico clínico, é dividido em dois tipos: Edgewise e Straight-Wire. Cada tipo de produto é dividido em especificações diferentes devido à forma como é fixado aos dentes e ao tamanho tridimensional.

Produzir desempenho:

1. O tubo vestibular tem alguma resistência soldável.
2. O material do tubo bucal é 17-4ph, aço inoxidável 304 (06Cr19Ni10), de acordo com as disposições da haste de aço inoxidável GB / t1220-2007, com boa biocompatibilidade.
3. A resistência retentiva da superfície do esmalte não deve ser inferior a 30N quando o tubo bucal é usado com adesivo de esmalte.

Instalação e manual do usuário (tubo bucal colável):

1. O produto só é utilizado pelo profissional dentista após treinamento.
2. Antes de usar, limpe a superfície dentária, a base do tubo bucal e desinfete o produto.
3. Rabisque o adesivo especializado uniformemente na superfície dos dentes e na base do tubo vestibular.

4. Coloque o tubo vestibular na superfície dos dentes corretamente, fixe após a reação do adesivo.
5. Todo tubo bucal é usado para o dente indicado, caso contrário não alcançará o efeito pretendido, mesmo causando o distúrbio oclusal.
6. Durante o tratamento, a tuba bucal pode cair, ao ser remendada, deve-se escolher o produto com a mesma especificação na mesma fabricação.
7. Após o tratamento, a retirada da tuba bucal deve ser feita sob a orientação do dentista clínico para evitar a lesão desnecessária.

Instalação e manual do usuário (tubo bucal soldável):

1. O produto só é utilizado pelo profissional dentista após treinamento.
2. O dentista deve soldar o tubo bucal soldável às bandas para torná-lo ao tubo bucal pré-soldável ortodôntico.
3. Antes de usar, limpe a superfície dentária, a parte interna do tubo ortodôntico e desinfete o produto.
4. Rabisque o adesivo especializado uniformemente na face interna do tubo de bandas ortodônticas.
5. Coloque as bandas pré-soldáveis no tubo nos dentes, fixe após a reação do adesivo.
6. Todo tubo bucal de bandas é utilizado para o dente indicado, caso contrário não alcançará o efeito pretendido, mesmo causando o distúrbio oclusal.
7. Durante o tratamento, as bandas do tubo vestibular podem cair, ao remendar, deve-se escolher o produto com a mesma especificação na mesma fabricação.
8. Após o tratamento, a retirada das bandas do tubo bucal deve ser feita sob a orientação do clínico dentista para evitar a lesão desnecessária.
9. Os acessórios ortodônticos podem ser soldados nas bandas-tubo, mas deve-se atentar para a resistência de soldagem para evitar que caiam.

O uso da atenção de diferentes tipos, especificações de produtos:

1. O tubo bucal soldável edgewise não tem o ângulo pré-estabelecido e sua base é lisa, por isso precisa ser soldado nas bandas e entortar os tipos de laços nos arcos ortodônticos para deixar todos os dentes na posição correta e ângulo.
2. O tubo bucal Roth & MBT soldável tem ângulo pré-estabelecido, e sua base é lisa, por isso precisa ser soldado nas bandas, mas elimina a necessidade de dobrar as alças, um fio de arco com a forma básica pode fazer todos os dentes para alinhar na posição correta.
3. O tubo bucal com bordas coláveis tem formato de estrutura reticular, então ele só precisa se colar diretamente na face do dente, mas não tem o ângulo predefinido, então requer que o dentista dobre a alça nos fios do arco para fazer cada dente na posição e ângulo corretos.
4. O tubo bucal Roth & MBT colável tem formato de estrutura reticular, então ele só precisa se colar diretamente na face do dente, mas tem o ângulo pré-estabelecido, portanto, elimina a necessidade de dobrar as alças, um fio de arco com a forma básica pode fazer com que cada dente se alinhe na posição correta.

Atenção:

1. Desinfete antes de usar.
Limpe normalmente ou passe um pano embebido em álcool, sem nenhuma mudança de cor após a limpeza, e não afetará o efeito ortodôntico.
2. Não coma a comida dura ao usar o tubo bucal para evitar a queda do tubo bucal.
3. O produto é apenas descartável, não use repetidamente.

**Contra-indicação:**

Pessoas sensíveis ao aço inoxidável devem usar com cuidado.


Marca:

O produto é apenas descartável, não reutilize.

Método de preservação: armazenado em gás não corrosivo, ambiente ventilado.

Prazo de validade: O prazo do produto é de 3 anos, consulte o número do lote na embalagem para saber a data de produção.

Versão: A / 2

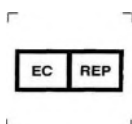

Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, le Verd, 2595AA,
Haia, Holanda
E-mail: peter@lotusnl.com
Tel: +31644168999



Material e dispositivos inovadores, Inc
Edifício # 5, No.615, Fengdeng Road, Jiading District, Shanghai
Tel: 86-21-59156556 Fax: 86-21-59156686
www.imdmedical.com