

## Instrukcja obsługi klamry językowej

**Nazwa produktu:** klamra językowa

**Zastosowanie funkcji produktu:** nadaje się do stosowania jako funkcjonalny aparat ortodontyczny podczas leczenia ortodontycznego.

**Specyfikacja modelu produktu:**

Zgodnie ze specyfikacją, sprzączki lingwalne dzielą się na sprzączki lingwalne klejone i sprzączki lingwalne spawane.

**Skład struktury produktu:** Klamra językowa wykonana jest z materiału ze stali nierdzewnej 06Cr19Ni10 (304), a jej podstawowa konstrukcja składa się z korpusu klamry językowej i tylnego arkusza. Wklej go na określoną część języka po stronie zęba, który ma być poprawiony (typ spajania) lub zgrzej punktowo do określonej części języka za pomocą pierścienia (typ spawu) i użyj elastycznego drutu lub gumek do naciągania, aby osiągnąć cel korekty.

Udział masowy składu chemicznego klamry bocznej języka spełnia wymagania GB/T1220-2007 „Pręt ze stali nierdzewnej” . (Jak pokazano na poniższym rysunku, jednostka %)

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni
≤0.08	≤1	≤2	≤0.045	≤0.03	18-20	8-11

Procentowy udział masowy innych pierwiastków śladowych kadmu, berylu i ołowiu w produkcie nie przekracza 0,02%, a procentowy udział masowy niklu w produkcie nie przekracza 11%.

**Wydajność produktu:**

Właściwości fizyczne:

Powierzchnia sprzączki językowej powinna być jasna, wolna od plam, pęknięć, krawędzi, defektów lub deformacji; dolna siatka przylepnej sprzączki językowej powinna być przezroczysta, czysta i wolna od ciał obcych; w normalnych warunkach użytkowania powierzchnia nie powinno być odbarwienie lub korozja; chropowatość powierzchni Ra powinna wynosić  $\leq 0,8 \mu\text{m}$ ; sprzączka językowa powinna mieć pewne właściwości mechaniczne. Spawana sprzączka językowa powinna być przyspawana do lekkiego pierścienia pasa, przyłożyć siłę 20 N przez 1 minutę i obserwować strona językowa nieuzbrojonym okiem Sprzączka nie ma widocznych deformacji, klejąca sprzączka językowa jest przyklejana do powierzchni szkliva i przez 1 minutę przykładana jest siła 30 N. Obserwacja gołym okiem nie wykazuje widocznej deformacji sprzączki językowej.

**Szereg zastosowań:**

Nadaje się do stosowania jako funkcjonalny aparat ortodontyczny podczas leczenia ortodontycznego w celu korekcji skręcenia i pochylenia zębów.

**Instrukcje:**

1. Oczyszczyć powierzchnię zęba i wyczyścić produkt przed użyciem. Zalecana metoda czyszczenia to: regularne czyszczenie lub pocieranie alkoholem.
2. Użyj kleju do emalii zgodnego ze specyfikacją, aby połączyć ten produkt (rodzaj łączenia) z odpowiednią powierzchnią zęba; ten produkt (rodzaj spawania) jest przyspawany do boku języka za pomocą pierścienia przez lekarza lub używany bezpośrednio wstępnie zgrzany pierścień taśmowy wyprodukowany przez producenta.

3. Umieścić elastyczny drut lub gumkę w sprzączce językowej, aby uzyskać przyczepność i osiągnąć cel korekcji.

**Środki ostrożności:**

1. Detoksykacja przed użyciem tego produktu.
2. Rutynowe czyszczenie lub pocieranie alkoholem, po czyszczeniu nie nastąpi zmiana koloru ani kształtu, a efekt korekcji nie zostanie naruszony.
3. Podczas korzystania z tego produktu staraj się nie jeść twardych pokarmów, aby zapobiec jego odpadnięciu.
4. Wysoka temperatura i warunki sterylizacji termicznej konwencjonalnych narzędzi dentystycznych nie mają wpływu na działanie klamry językowej.

**Logo:**



Ten produkt jest używany tylko przez lekarzy



Ten produkt może być używany tylko raz, nie wielokrotnego użytku.

**Sposób przechowywania: Przechowywać w niekorozyjnym, wentylowanym środowisku gazowym.**

**Okres gwarancji:** Zapakowane sprzączka językowa jest objęta gwarancją 3 lata od daty dostawy, z zastrzeżeniem zasad przechowywania, transportu, przechowywania i użytkowania. Data produkcji i numer partii podane są na etykiecie opakowania.

Data przygotowania: 02.05.2017

**Znak:**




Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10, le Verd, 2595AA,

Haga, Holandia

E-mail: peter@lotusnl.com

Tel: +31644168999

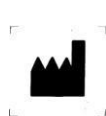

Innowacyjne materiały i urządzenia, Inc

Budynek nr 5, nr 615, Fengdeng Road, dzielnica Jiading, Szanghaj

Tel: 86-21-59156556 Faks: 86-21-59156686

www.imdmedical.com