

## Instrukcja dla zespolenia wstępnego z rurką buckalną

**Nazwa produktu:** Spawany pasek z rurką buckalną

### **Zastosowanie:**

Ortodontyczna rurka z opaską jest stosowana do stomatologii ortodontycznej. W trakcie operacji klinicznej rurka zębowa opaskowa jest przymocowana do powierzchni zęba, aby zapewnić wsparcie dla korekty zniekształconych zębów i osiągnąć cel w ustawieniu zęba.

### **Funkcja produktu:**

Nastrojenie zębów jest bardzo powolnym procesem. Potrzebuje profesjonalnych dentyków do projektowania metod leczenia i przenoszenia zębów z istniejącej pozycji do planowanej pozycji. Szczepionki przemieszczają zęby siłą z przewodu, wspornika i przewodu, podpawanego taśmą z rurką buckalną, w celu przesunięcia zębów do zaprojektowanego położenia i ostatecznie wyrównania zębów. Lek jest stosowany przez pacjentów leczonych ortodontami w leczeniu uzębienia u ludzi.

### **Rodzaj i specyfikacja produktu:**

Przedspawany zespół z rurką buckalną dzieli się na dwa rodzaje: rurę prostą i krawędziową. Specyfikacje to: Edgewise spawalne rurki, Edgewise spawalne rurki typu A, spawalna rura z przewodem prostym, spawalna rura z przewodem prostym, i spawalna z drutem prostym McTeTr.

Podzielone na różne specyfikacje w zależności od obwodu pasma.

### **Właściwości produktu:**

1. Taśma na prespawanej taśmie z rurką buckalną powinna być sztywna.

2. Materiały tuby ortodontycznej z pierścieniem są 17-4ph i 06Cr19Ni10, które są zgodne z przepisami GB/ t1220-2007 walcówki ze stali nierdzewnej i mają dobrą zgodność biologiczną.

3. Wymagana jest wytrzymałość spawania między taśmą a rurką buckalną.

### **Instaluj i użyj metody:**

1. Produkt jest dostępny tylko dla dentyków z treningu.

2. Przed użyciem produktu, powierzchnia zębów powinna być oczyszczona, a produkt powinien zostać oczyszczony i zdezynfekowany.

3. Specjalny odczynnik do wiązania ortodontycznego należy wkleić jednorodnie wewnątrz taśmy.

4. Umieścić pasek na zębie prawidłowo i czekać na wyschnięcie odczynnika klejącego.

5. Każde odniesienie produktu jest zaprojektowane do różnych zębów. Może pasować tylko do zaprojektowanego zęba. Jakiegokolwiek nadużycie nie będzie zgodne z celem leczenia. Co więcej, można to nazwać błędną zamknięciem.

6. Po spadku pasma podczas obróbki, ponownie wklej odczynnik powinien być tym

samym wzorcem i typem tego samego producenta.

7. Po leczeniu, usunięcie produktu powinno być prowadzone przez lekarzy dentystrycznych, w celu uniknięcia urazów pacjenta.

8. Produkt może spawać z innymi akcesoriami ortodontycznymi. Aby uniknąć spadku, wymagana jest jednak wytrzymałość spawania.

#### **Dbaj o stosowanie produktu o różny typ i specyfikację:**

1. Ze względu na to, że poprzecznie spawany zespół z rurką buckalną na drutach prostych nie jest ustawiony pod kątem, dentysta musi zginać drut w odpowiednim miejscu drutu przez ręce, tak aby zapewnić, że pozycja i kąt produktu jest dopasowany do każdego zęba.

2. Ponieważ ustawiono kąt prespawanej taśmy z rurką buckalną do drutu brzegowego, dentysta nie musi zginać drutu. Jest dostępny normalny drut profilowy dopasowany do pozycji i kąta produktu poprzez po prostu umieścić drut w dziurze produktu.

#### **Kary:**

1. Jest to konieczne do przeprowadzenia dezynfekcji produktu przed użyciem. Normalne mycie i/lub czyszczenie alkoholem nie zmieni koloru lub profilu produktu i nie wpłynie na wyniki leczenia.

2. Podczas leczenia nie wolno gryźć twardej żywności. To może upuścić słuzę.

3. Produkt jest używany tylko raz i nie może być używany ponownie.



#### **Przeciwwskazania:**

Pacjent jest uczulony na stal nierdzewna.




Produkt może być stosowany tylko raz. Nie wolno używać ponownie.

**Przechowywanie:** Przechowywanie w atmosferze korozyjnej i wentylacji

**Termin ważności:** trzy lata. Data produkcji i numer partii są oznaczone na opakowaniu

Version: A/2 2020-12

#### **Mark:**

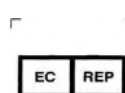

Lotus NL B.V.  
Koningin Julianaplein 10, le Verd, 2595AA,  
Haga, Niderlandy  
E-mail: peter@lotusnl.com  
Tel: +31641689



Innowacyjne materiały i urządzenia, Inc.

Budynek \doublic355,nr.615,Fengdeng Road, Jiad District, Szanghaj

Tel: 86-21-5915656 Faks:86-21-59156686

[www.imdmedical.com](http://www.imdmedical.com)