

Instruktioner för Buccal Tube

Produktnamn: Buccal tube

Avsedd användning:

Buccal-röret används för tandreglering. Vid klinisk operation fixerar du buccal-röret på tänderna och ger stödkraften med hjälp av tandreglering för att uppnå syftet att rikta in tänderna.

Produktfunktion:

Ortodontisk behandling är en lång och långsam process under denna process; det kräver den professionella z- tandläkaren att hantera de ojämna tänderna med flera metoder för att få tänderna att flytta till rätt position. Professionella läkare använder ortodontiska produkter såsom tandregleringskonsoler, buccal tuber och orthodontic ring buccal tubes för att applicera olika typer av tandregleringskrafter på tänderna för att flytta tänderna till rätt position och uppnå syftet med inriktningen. Det används av kliniska ortodontister för ortodontisk behandling av mänsklig tandvård.

Produkttyp, specifikation:

Buccal tubmodeller är indelade i två typer: Straight-Wire och Edgewise tube . Specifikationer inkluderar Edgewise svetsbart rör , Edgewise svetsbart rör A-typ rör , svetsbart rakt -W ire rör , svetsbart rakt Wire Roth och svetsbart rakt tråd McBeTr, bindbart Edgewise rör, bindbart Edgewise A-typ, bindbart rak-Wire rör , bindbart rakt -Wire Roth, bindbar rak-Wire McBeTr.

Enligt olika kliniska tandregleringskoncept och system är den uppdelad i två typer: Edgewise och straight-Wire. Varje typ av produkt är uppdelad i olika specifikationer på grund av hur den är fäst vid tänderna och den tredimensionella storleken.

Producera prestanda:

1. Buccal-röret har en viss svetsbar styrka.
2. Buccal rörmaterial är 17-4ph, 304 rostfritt stål (06Cr19Ni10), i enlighet med bestämmelserna i GB / t1220-2007 rostfritt stålstång, med god biokompatibilitet.
3. Emaljytans retentiva hållfasthet bör vara minst 30N när buccal-röret används med emaljhäftande.

Installations- och användarmanual (Bondable buccal tube):

1. Produkten används endast av den professionella tandläkaren efter träning.
2. Rengör tänderna, buccalrörets botten och desinficera produkten innan du använder den.
3. Klottra det specialiserade limet jämnt på ytan på tänderna och basen på buken.
4. Sätt buccalröret korrekt i tänderna på ytan, fäst efter att limet har reagerat.
5. Varje buccal-rör används för den utsedda tanden, annars uppnår den inte den avsedda effekten, även den kommer att orsaka ocklusal störning.

6. Under behandlingen kan buccal-röret falla ner, när det lagras, bör välja produkten med samma specifikation i samma tillverkning.
7. Efter behandlingen ska avlägsnandet av buccalröret ske under ledning av den kliniska tandläkaren för att undvika onödig skada.

Installations- och användarmanual (svetsbart bukkrör):

1. Produkten används endast av den professionella tandläkaren efter träning.
2. Tandläkaren bör svetsa det svetsbara buccalröret till banden för att nå det till det ortodontiska försvetsbara förbudet för buccalröret.
3. Rengör tändernas yta, det inre av det tandreglage-bandröret innan du använder det, och desinficera produkten.
4. Klotter det specialiserade limet jämnt på det inre ansiktet på tandregleringens bandrör.
5. Sätt de försvetsbara banden rör på tänderna, fäst efter att limet har reagerat.
6. Varje band buccal tub används för den utsedda tanden, annars uppnår den inte den avsedda effekten, även den kommer att orsaka ocklusal störning.
7. Under behandlingen kan buccalröret falla ner när de lagras ska de välja produkten med samma specifikation i samma tillverkning.
8. Efter behandlingen bör avlägsnandet av buccalröret göras under ledning av den kliniska tandläkaren för att undvika onödig skada.
9. De ortodontiska tillbehören får svetsas på bandröret, men bör se till att svetsstyrkan undviker att falla ner.

Användningen av uppmärksamhet av olika typer, specifikationer produkter:

1. Det svetsbara kantformade bukkröret har inte den förinställda vinkeln, och dess bas är slät, så det måste svetsas på banden och böja olika typer av öglor på de tandregulerade bågtrådarna för att göra varje tand i rätt läge och vinkel.
2. Det svetsbara Roth & MBT buccal-röret har förinställd vinkel och basen är slät, så det måste svetsas på banden, men det tar bort behovet av att böja öglorna, en bågtråd med grundformen kan göra varje tand för att justera till rätt position.
3. Det fästbara kantformade bukkröret har retikulärt strukturformat, så det behöver bara bindas direkt på tänderna, men det har inte den förinställda vinkeln, så det kräver att tandläkaren böjer öglan på bågtrådarna för att göra varje tand på rätt position och vinkel.
4. Det bindbara Roth & MBT buccal-röret har retikulärt strukturformat, så det behöver bara bindas direkt på tänderna, men det har den förinställda vinkeln, så det tar bort behovet av att böja öglorna, en bågtråd med grundformen kan göra att varje tand anpassar sig till rätt position.

Uppmärksamhet:

1. Desinficera före användning.
Normalt rengör eller torka med alkoholen utan att ändra färg efter rengöring och påverkar inte den tandreglering.

2. Ät inte den hårda maten när du använder buccal-röret för att undvika att buccaltube faller ner.
3. Produkten är endast engångsbruk, använd inte flera gånger.

**Kontraindikation:**

Personer som är känsliga med rostfritt stål bör använda försiktighet.


Märke:

Produkten är endast disponibel, använd inte den igen.

Konserveringsmetod: Förvaras i icke frätande gas, ventilationsmiljö.

Giltighetstid: Produktens villkor är 3 år, kontrollera produktnumret på förpackningen för produktionsdatumet.

Version: A / 2

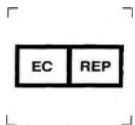

Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, le Verd, 2595AA,
Haag, Nederländerna
E-post : peter@lotusnl.com
Tel: +31644168999



Innovativt material och enheter, Inc.
Byggnad nr 5, No.615, Fengdeng Road, Jiading District, Shanghai
Tel: 86-21-59156556 Fax: 86-21-59156686
www.imdmedical.com