

Használati utasítás

Termék neve: Fogszabályozó fém konzol

Rendeltetésszerű használat

Fogszabályozó konzolt alkalmaznak a sztomatológiai fogkorrekcióra. A klinikai beavatkozás során rögzítse a fogszabályozó konzolt a fogak felületére, támogató erőt kínáljon a deformált fog korrekciójára, és érje el a fog igazításának célját.

Termék funkció :

A fogszabályozó kezelés hosszú és lassú folyamat, amelynek során professzionális fogorvosokra van szükség a lelepleződő fogak kezelésével különféle módszerekkel, valamint a fogak mozgatásához a helyes helyzet érdekében. A professzionális fogorvosok különféle fogszabályozó erőket gyakorolnak a fogra a fogszabályozó konzol bukkális csövének, szalagjának és bármely más fogszabályozó terméknek a használatával, hogy a fogat megfelelő helyzetbe lehessen mozgatni, és a fog összehangolásának célját elérjék .

Terméktípus specifikációk:

Porkohászati fém konzolok vannak osztva Copolla, Ophro, Atua, Pro MIM , Act MIM Öt féle modell szerint a műszaki paraméterei porkohászati fém konzolok vannak osztva Roth, Mc B e T R, R Oth +, élére állított F mi típusú specifikációk, az adott modell specifikációit lásd az ütemezésben.

Fő szerkezet:

A por kohászati fém konzol típus szerint fel van osztva közönséges fém konzolokra és fém önzáró konzolokra, a fém kohászat pedig a 05C r 17N i 4C u 4N b rozsdamentes acél alapanyagaiból készül a GB / T 1220 szerint. -2007 "rozsdamentes acél rúd", és az alaplemez anyaga GB / T 1220-2007 "Rozsdamentes acél rúd" a 06 C r19 N i10 alapanyagokból készült rozsdamentes acél anyaghoz. A fém kohászati fém konzol egy aljzatból és egy alsó lemezből áll (repszeket tartalmazó fém önzáró konzol).

Részletezés és alkalmazás módja:

1. Használat előtt tisztítsa meg a fog felületét és a tartóhálózat alját
2. Használat előtt a fogorvosoknak be kell fejezniük az első fázis előkészítési munkáit, például a fogak felületének és a tartóháló alapjának tisztítását stb. , És sterilizálniuk kell ezt a terméket.
3. A speciális fogszabályozó ragasztót egyenletesen kenje be a fogak felületére és a tartóháló alapjára.
4. Helyezze a fogszabályozó konzolt a fogak megfelelő helyzetére ; rögzítse a ragasztó reakciója után.
5. Minden konzol csak lenni kijelölt fogak helyzetét, különben tenne ' t kap várt hatás, még okozhat okklúziós rendellenességek.
6. Ha a konzol leesik a kezelés során, akkor ugyanazon gyártótól származó konzolt kell használni, mint kiegészítőt.

7. A fogsabályozó kezelés befejeztével a felfogót a klinikus útmutatása alapján el kell távolítani a szükségtelen sérülések elkerülése érdekében.

Módszer a por kohászati önzáró konzol tárgylemezének vagy repeszének kinyitására és bezárására:

1. Fém önzáró konzol (csúszó) Nyitva: Kérjük, a speciális konzol segítségével oldja ki a szerszámot a horonyba, 90 fokkal elforgatva, hogy a huzal szabadon és kifelé nyíljon.
2. Fém önzáró konzolok (csúszó) Zárás: Kérjük, használjon speciális fogókat vagy ujjakat a konzolok mentén a tengely dőlésének irányában, hogy a csúszkát tolja, hogy tiszta "húzóérzet" legyen a zárási művelet befejezéséhez.
3. Fém önzáró konzol (repsz) Nyitott: Kérjük, hogy egy speciális konzolos reteszelő eszközzel akassza fel a rugó végének hegyét a konzolokba a tengely dőlésiránya mentén az állkapocs felé a SANLA felé, nyithatja meg, vagy egy speciális konzol kinyitó szerszám beillesztve a nyitva forgó repesz hornyába.
4. Fém önzáró konzol (repsz) Zárja be: Kérjük, használja az ujját a konzolok mentén a tengely fényszögének irányába, nyomja meg a repeszeket.

Óvintézkedések:

1. Ezt a terméket csak fogorvosok használhatják edzés után.
2. A termék használata a hagyományos tisztítás vagy alkoholos törlőkendő előtt, szín- és alakváltozás nélküli tisztítás nélkül nem befolyásolja a finomító hatást.
3. Használja ezt a terméket, kérjük, ne igyon több kemény ételt, hogy megakadályozza a fém kohászati fém konzolok kikapcsolását.
4. Ez a termék csak egyszer használható, nem használható fel újra.



Ellenjavallatok:

1. A parodontális betegségben szenvedő betegeket jól kezelni kell, mielőtt felhasználhatók lennének.
2. Rozsdamentes acél, nikkelt anyagallergia esetén.
3. Egyéb megfelelőségi utasítások.


Megőrzési módszer : Nem maró gáz, szellőztetett környezetben a megtakarítás érdekében.

Érvényességi idő: A becsomagolt fogsabályozó fém konzolokat a szállítás napjától számított 3 évig használják, a tárolási és használati szabályok betartásának feltételei mellett. A gyártás dátuma és a gyártási tétel száma megtalálható a csomagolás címkéjén.

Összeállítás dátuma: 2016. október 25

Mark:



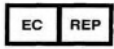

Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10,le Verd,2595AA,
Hága , Hollandia
E-mail: peter@lotusnl.com
Tel: +31644168999



Innovative Material and Devices, Inc
5. épület, No.615, Fengdeng Road, Jiading District, Shanghai
Tel: 86-21-59156556 Fax:86-21-59156686
www.imdmedical.com