

Ohje Käsikirja esikhitsattua nauhaa varten, jossa on

buccal-putki

Tuotteen nimi: Esihitsattu nauha, jossa on buccal-putki

Sovellus:

Ortodonisen buccalin putkea, jossa on laastari, käytetään hammashoitoon. Kliinisessä käytössä hampaiden pinnalle on kiinnitetty ortodoninen aaltoputki, jolla tuetaan epämuodostuneiden hampaiden korjaamista ja jolla saavutetaan hampaan linjauksen tavoite.

Tuotteen käyttötarkoitus:

Hampaiden linjaus on hyvin hidas prosessi. Se tarvitsee ammattimaisia hammaslääkäreitä suunnitella käsittelymenetelmiä ja siirtää hampaita nykyisestä paikasta suunniteltuun asentoon. Hampaiden on siirrettävä hampaat väkisin langasta, sulusta ja kuivaputkesta, esihitsatusta nauhasta ja buccal-putkesta, jotta hampaat voidaan siirtää suunniteltuun asentoon ja jotta hampaat voidaan lopulta yhdenmukaistaa. Sitä käytetään kliinisissä oikomistutkimuksissa ihmisen hampaiden oikomishoitoon.

Tuotetyyppi ja eritelmä:

Esihitsattu nauha, jossa on buccal putki, on jaettu kahteen tyyppiin: Straight-Wire ja Edgeway putki. Eritelmät sisältävät Edgeway hitsattavan putken, Edgeway hitsattavan A-tyyppisen putken, hitsattavan suoralangan putken, hitsattavan suoralangan Rothin ja hitsattavan suoralangan McBri.

Se on jaettu eri eritelmiin kaistan kehän mukaan.

Tuotteen ominaisuudet:

1. Esihitsatun nauhan, jossa on buccal-putki, pitäisi olla jäykkä.
2. Ortodotilaisen bukkaalitutken, jossa on rengas, materiaalit ovat 17-4ph ja 06Cr19Ni10, jotka ovat GB/ t1220 - 2007 ruostumattoman terästankon säännösten mukaisia ja bioyhteensopivia.
3. Nauhan ja vesiputken välistä hitsausvoimaa tarvitaan.

Asenna ja käytä menetelmää:

1. Tuote on saatavilla vain hammaslääkäreille, joilla on koulutus.
2. Ennen valmisteen käyttöä hampaat on puhdistettava ja tuote on puhdistettava ja desinfioitava.
3. Eriytynen ortodonttinen sidomisreagenssi olisi liimattava tasaisesti kaistan sisäpuolelle.
4. Aseta nauha oikein hampaan kohdalle ja odota, että sidostereagenssi kuivuu.
5. Jokainen tuotteen viite on suunniteltu eri hammas. Se mahtuu vain suunniteltuun hampaaseen. Väärinkäyttö ei täytä hoidon tavoitteita. Lisäksi se voi kutsua vääräksi tukkeutumiseksi.

6.Kun annosväli putoaa käsittelyn aikana, uudelleenliimatun reagenssin olisi oltava sama viite ja sama valmistajan tyyppi.

7.Hoidon jälkeen lääkkeen poisto tulee antaa hammaslääkäreille ohjeita, jotta potilas ei voi loukkaantua.

8.Tuote on sallittu hitsata muiden ortodonttisten tarvikkeiden kanssa.Hitsauksen lujuus on kuitenkin tarpeen putoamisen välttämiseksi.

Käyttö eri tyyppin ja spesifikaation omaavalle tuotteelle:

1.Koska esihitsattua nauhaa, jossa on buccal-putki suoraa lankaa varten, ei aseteta kulmaan, hammaslääkärin on taivutettava lankaa asianmukaiseen paikkaan käsin, jotta varmistetaan, että tuotteen sijainti ja kulma sopivat yhteen jokaisen hampaan kanssa.

2. Koska esihitsatun nauhan kulma, jossa on buccal combe for Edgewise wire, on asetettu, hammaslääkärin ei tarvitse taivuttaa lankaa.Käytettävissä on normaali profiililanka, joka sopii tuotteen sijaintiin ja kulmaan yksinkertaisesti laittaa langan tuotteen reikään.

Huolehtii:

1.Valmiste on desinfioitava ennen käyttöä.Tavanomainen pesu ja/tai puhdistaminen alkoholilla ei muuta tuotteen väriä tai profiilia eikä vaikuta hoidon tuloksiin.

2.Se ei saa purra kovaa ruokaa hoidon aikana.Se saattaa pudottaa produktin.

3.Tuotetta käytetään yhden kerran eikä sitä saa käyttää toistamiseen.



Vasta- aiheet:

Potilas on allerginen ruostumattomalle teräkselle.



Tuotetta voidaan käyttää vain yhden kerran.Toista käyttöä ei sallita.

Varastointi: Ei-syövyttävässä ilmapiirissä ja tuuletetussa ympäristössä


Voimassaoloaika: kolme vuotta.Valmistusajankohta ja erän numero on merkitty pakkaukseen

Version:A/2 2020-12

Merkki:



┌ ┌ Lotus NL B.V.
└ └ Koningin Julianaplein 10,le Verd,255AA,
 Haag, Alankomaat
┌ └ E-mail:peter@lotusnl.com
 Tel:+316416899

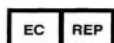



Innovatiiviset materiaalit ja laitteet

Rakennus\35;5,N.615,Fengdeng Road, Jiading District, Shanghai

Tel: 86-21-59156556 Faksi:86-21-59156686

www.imdmedical.com