

Manual de instruções do fórceps ortodôntico

Nome do produto: Alicate ortodôntico

Âmbito de aplicação: utilizado para cortar, prender, dobrar o fio do arco ou fio de ligadura, remover os braquetes de colagem, laços de fita, etc. no processo de tratamento ortodôntico

Especificação do modelo do produto:

Os alicates ortodônticos são divididos em dois tipos, embutidos e não embutidos. Os modelos classificados de acordo com o formato da cabeça são mostrados na tabela a seguir:

Serial	Modelo	Serial	Modelo
1	Alicate de corte final	22	Três alicates de bico
2	Alicate de corte final de cabo longo	23	Alicate para corte de fio grosso
3	Alicate para corte de filamento	24	Alicate em forma de V
4	Alicate de corte final de cabo longo	25	Alicate trapézio meia-lua
5	Alicate de corte final	26	Alicate formador de torque
6	Alicate formador de filamento	27	Alicate multifuncional
7	Alicate para corte de fita formando filamento	28	Alicate decap para tubo bucal
8	Alicate pequeno sol lua	29	Alicate de anel divisor
9	Alicate de fixação de gancho grátis	30	Alicate de torque de ponta dupla
10	Alicate de remoção de suporte	31	Alicate de torque de cabeça simples
11	Alicate de remoção de suporte de cabeça longa	32	Alicate vertical
12	Pinça de remoção do	33	Alicate horizontal

	suporte posterior		
13	Alicate KIM	34	Pinça Teardrop
14	Alicate de remoção de anel	35	Alicate de punção (6 mm)
15	Alicate de remoção de anel de faixa longa	36	Alicate de perfuração (3mm)
16	Alicate para dobrar as pontas	37	Pinças de suporte
17	Alicate trapézio	38	Fórceps de tubo bucal
18	Fórceps de Hor	39	Alicate para agulhas
19	Alicate de remoção de aglutinante	40	Alicate formador com anel
20	Alicate de dobra de níquel-titânio	41	Alicate especial para gancho de reboque
21	Alicate de dobra vertical	42	Braçadeira

Estrutura do produto:

Geralmente consiste no bico do alicate, nas juntas e no cabo do alicate. As mandíbulas do alicate podem ter diferentes formatos de acordo com a finalidade e são geralmente feitas de aço inoxidável. Fornecido não estéril.

Performance do produto:

As pinças ortodônticas são ferramentas auxiliares clínicas muito utilizadas pelos médicos no processo de tratamento ortodôntico. A pinça ortodôntica pode ser usada para dobrar ou cortar arcos ortodônticos, remover braquetes colados ou alças e colocar elásticos ou ganchos livres.

Contra-indicações:

não.

Instruções

1. A pinça ortodôntica deve ser usada por dentistas profissionalmente treinados;
2. O novo produto deve ser desinfetado após a desembalagem. O método de desinfecção recomendado é a esterilização a vapor sob pressão, ou seja, a temperatura é de 132 ~ 134 °C e o tempo é de 4 minutos.

Precauções:

Desinfete a pinça ortodôntica antes e depois do uso para prevenir infecções cruzadas.

Certifique-se de que a superfície do instrumento esteja seca. A erosão de longo prazo pela umidade causará problemas como descoloração e ferrugem do corpo da braçadeira.

Se você encontrar rebarbas, rachaduras, etc. na superfície da pinça ortodôntica, você deve parar de usá-la.

Se a pinça ortodôntica com lâmina for usada por um período de tempo, se ficar cega, pare de usá-la.

É para uso ortodôntico apenas por ortodontistas. O uso não intencional é proibido.

Instruções de manutenção

Use um gabinete de esterilizador a vapor de pressão a vácuo para esterilizar antes e depois do uso e não entre em contato com substâncias corrosivas.

Condições de armazenamento


Deve ser armazenado em temperatura ambiente, com umidade relativa não superior a 80%, sem gases corrosivos e em ambiente bem ventilado.

Período de garantia:

Os alicates ortodônticos têm garantia de cinco anos a partir da data de saída da fábrica, desde que observadas as normas de armazenamento, transporte, armazenamento e utilização. A data de produção e o número do lote de produção são mostrados na etiqueta da embalagem.

Data de compilação: 18 de novembro de 2019 Número da versão: A / 0 2019

Marca:

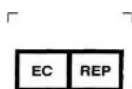

Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10, le Verd, 2595AA,

The Hague, Netherlands

E-mail: peter@lotusnl.com

Tel: +31644168999



Innovative Material and Devices, Inc

Building #5, No.615, Fengdeng Road, Jiading District, Shanghai

Tel: 86-21-59156556 Fax: 86-21-59156686

www.imdmedical.com

Quando a empresa envia a especificação do produto e a amostra de design de etiqueta de unidade de vendas mínima, ela assume os seguintes compromissos:

A empresa promete cumprir com os requisitos relevantes do "Anúncio sobre questões relativas ao arquivamento de dispositivos médicos de Classe I" (Anúncio nº 26, 2014) da Administração Estatal de Alimentos e Medicamentos sobre o "Manual do Produto e Amostras de Design de Etiqueta de Unidade de Venda Mínima", Marque o número do registro no manual e na etiqueta do dispositivo médico.

A empresa promete: O manual do dispositivo médico e o design da etiqueta estão em conformidade com as leis e regulamentos.

Material e dispositivos inovadores, Inc.
18 de outubro de 2019