

Manuale di istruzioni della fibbia linguale

Nome del prodotto: fibbia linguale

Uso funzionale del prodotto: adatto per l'uso come apparecchio ortodontico funzionale durante il trattamento ortodontico.

Specifiche del modello di prodotto:

Secondo le specifiche, le fibbie linguali sono suddivise in fibbie linguali incollate e fibbie linguali saldate.

Composizione della struttura del prodotto: la fibbia linguale è realizzata in acciaio inossidabile 06Cr19Ni10 (304) e la sua struttura di base è composta dal corpo della fibbia linguale e dal lenzuolo posteriore. Incollalo su una certa parte del lato della lingua del dente da correggere (tipo di legame), o saldalo a punti su una certa parte della lingua con un anello (tipo di saldatura) e usa il filo elastico o gli elastici per la trazione per raggiungere lo scopo della correzione.

La frazione di massa della composizione chimica della fibbia laterale della linguetta soddisfa i requisiti di GB/T1220-2007 "Asta in acciaio inossidabile". (Come mostrato nella figura sottostante, unità %)

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni
≤0.08	≤1	≤2	≤0.045	≤0.03	18-20	8-11

La frazione di massa percentuale di altri oligoelementi cadmio, berillio e piombo nel prodotto non è superiore allo 0,02% e la frazione di massa percentuale di nichel nel prodotto non è superiore all'11%.

Prestazioni del prodotto:

Proprietà fisiche:

La superficie della fibbia linguale deve essere brillante, priva di macchie, crepe, bordi, difetti o deformazioni; la rete inferiore della fibbia linguale adesiva deve essere chiara, pulita e priva di corpi estranei; in condizioni di utilizzo normali, la superficie non dovrebbe essere scolorimento o corrosione; il valore Ra di rugosità superficiale dovrebbe essere $\leq 0.8 \mu m$; la fibbia linguale dovrebbe avere determinate proprietà meccaniche. La fibbia linguale saldata dovrebbe essere saldata all'anello della cintura leggera, applicare una forza di 20 N per 1 minuto e osservare il lato linguale a occhio nudo. La fibbia non presenta deformazioni evidenti; la fibbia linguale adesiva è incollata alla superficie dello smalto e viene applicata una forza di 30 N per 1 minuto. Non vi è alcuna deformazione evidente della fibbia linguale mediante osservazione ad occhio nudo.

Ambito di applicazione:

È adatto per l'uso come apparecchio ortodontico funzionale durante il trattamento ortodontico per correggere la torsione e l'inclinazione dei denti.

Istruzioni:

1. Pulire la superficie del dente e pulire il prodotto prima dell'uso. Il metodo di pulizia consigliato è: pulizia regolare o sfregamento con alcool.
2. Utilizzare un adesivo per smalto conforme alle specifiche per incollare questo prodotto (tipo adesivo) alla superficie del dente corrispondente; questo prodotto (tipo saldante) è saldato al lato della lingua con un anello dal medico o utilizzato direttamente. anello a fascia pre-saldato prodotto dal produttore.
3. Metti il filo elastico o l'elastico nella fibbia linguale per ottenere la trazione e raggiungere lo

scopo della correzione.

Precauzioni:

1. Disintossicare prima di utilizzare questo prodotto.
2. Pulizia di routine o sfregamento con alcool, non ci saranno cambiamenti di colore o forma dopo la pulizia e l'effetto di correzione non sarà influenzato.
3. Quando si utilizza questo prodotto, cercare di non mangiare cibi duri per evitare che cadano.
4. Le condizioni di sterilizzazione ad alta temperatura e calore degli strumenti dentali convenzionali non influiranno sulle prestazioni della fibbia linguale.

Logo:

Questo prodotto è utilizzato solo dai medici

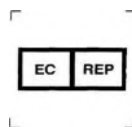


Questo prodotto può essere utilizzato solo una volta, non riutilizzabile.

Metodo di conservazione: conservare in un ambiente ventilato e con gas non corrosivo.

Periodo di garanzia: La fibbia linguale confezionata ha un periodo di garanzia di 3 anni dalla data di consegna, soggetta alle regole di conservazione, trasporto, conservazione e utilizzo. La data di produzione e il numero di lotto sono riportati sull'etichetta della confezione.

Data di preparazione: 02 maggio 2017

Marchio:

Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, le Verd, 2595AA,
L'Aia, Paesi Bassi
E-mail: peter@lotusnl.com
Tel: +31644168999



Materials e dispositivi innovativi, Inc
Edificio n. 5, n. 615, Fengdeng Road, distretto di Jiading, Shanghai
Tel: 86-21-59156556 Fax: 86-21-59156686
www.imdmedical.com

