

## Navodila za uporabo jezičnih sponk

**Ime izdelka:** lingvalna zaponka

**Uporaba funkcije izdelka:** primeren za uporabo kot funkcionalni ortodontski aparat med ortodontskim zdravljenjem.

**Specifikacija modela izdelka:**

V skladu s specifikacijami se jezične zaponke delijo na vezane jezične zaponke in varjene jezične zaponke.

**Sestava izdelka:** Jezikovna zaponka je izdelana iz nerjavečega jekla 06Cr19Ni10 (304), njeno osnovno strukturo pa sestavljajo jezikovno telo zaponke in zadnja folija. Prilepite ga na določen del jezikovne strani zoba, ki ga želite popraviti (vrsta lepljenja), ali pa ga točkovno privarite na določen del jezika z obročem (vrsta varjenja) in za vleko uporabite elastično žico ali gumijaste trakove doseči namen popravka.

Masni delež kemične sestave stranske zaponke jezika izpolnjuje zahteve GB / T1220-2007 "Palica iz nerjavečega jekla". (Kot je prikazano na spodnji sliki, enota%)

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni
≤0.08	≤1	≤2	≤0.045	≤0.03	18-20	8-11

Odstotni masni delež drugih elementov v sledovih kadmij, berilij in svinec v izdelku ne presega 0,02%, masni delež niklja v izdelku pa ne presega 11%.

**Uspešnost izdelka:**

Fizične lastnosti:

Površina jezičaste zaponke mora biti svetla, brez madežev, razpok, robov, napak ali deformacij; spodnja mreža lepilne jezičaste sponke mora biti čista, čista in brez tujkov; v normalnih pogojih uporabe mora biti površina normalna ne sme biti razbarvanje ali pride do korozije; hrapavost površine Ra mora biti ≤ 0,8 μ m; lingvalna sponka mora imeti določene mehanske lastnosti. lingvalna stran s prostimi očmi Sponka nima očitnih deformacij; lepilna lingvalna zaponka je prilepljena na površino sklenine in 1 minuto deluje sila 30N.

**Področje uporabe:**

Primeren je za uporabo kot funkcionalni ortodontski aparat med ortodontskim zdravljenjem za korekcijo torzije in nagiba zob.

**Navodila:**

- Očistite površino zoba in izdelek očistite pred uporabo. Priporočen način čiščenja je: redno čiščenje ali drgnjenje z alkoholom.
- Uporabite lepilo za emajl, ki ustreza specifikaciji, da ta izdelek (vrsta lepljenja) pritrdite na ustrezno površino zoba; ta izdelek (vrsta varjenja) zdravnik privari na obroč z obročem ali ga uporabi neposredno predvarjeni obročni trak proizvajalca.
- V jezično zaponko vstavite elastično žico ali gumico, da dosežete oprijem in dosežete namen popravljanja.

**Previdnostni ukrepi:**

- Pred uporabo tega izdelka razstrupite.
- Redno čiščenje ali drgnjenje z alkoholom, po čiščenju se ne bo spremenila barva ali oblika in ne bo vplival na korekcijski učinek.

3. Ko uporabljate ta izdelek, ne jejte trde hrane, da ne bo padla.
4. Pogoji sterilizacije z visokimi temperaturami in toploto pri običajnih zobnih instrumentih ne bodo vplivali na delovanje jezičaste sponke.

**Logotip:**

Ta izdelek uporabljajo samo zdravniki

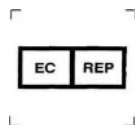


Ta izdelek je mogoče uporabiti samo enkrat in ga ni mogoče ponovno uporabiti.

**Način skladiščenja:** Shranjujte v nekorozivnem plinskem, prezračevanem okolju.

**Garancijsko obdobje:** Pakirana lingvalna zaponka ima garancijsko obdobje 3 leta od datuma dostave, ob upoštevanju pravil skladiščenja, prevoza, skladiščenja in uporabe. Datum izdelave in številka serije sta prikazana na embalaži.

**Datum priprave:** 02. maj 2017

**Oznaka:**

Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10, Ie Verd, 2595AA,

Haag, Nizozemska

E-naslov: peter@lotusnl.com

Tel: +31644168999



Inovativni material in naprave, Inc.

Zgradba št. 5, št. 615, cesta Fengdeng, okrožje Jiading, Šanghaj

Tel: 86-21-59156556 Faks: 86-21-59156686

www.imdmedical.com

