

Navodila za uporabo ortodontskih klešč

Ime izdelka: Ortodontske klešče

Področje uporabe: uporablja se za rezanje, vpenjanje, upogibanje ločne žice ali vezne žice, odstranjevanje veznih nosilcev, pasovnih zank itd. V postopku ortodontskega zdravljenja

Specifikacija modela izdelka:

Ortodontske klešče delimo na dve vrsti, intarzirane in neintarzirane. Modeli, razvrščeni glede na obliko glave, so prikazani v naslednji tabeli:

Serijski	Model	Serijski	Model
1	Klešče za končno rezanje	22	Tri kljunaste klešče
2	Klešče za rezanje z dolgim ročajem	23	Klešče za rezanje debele žice
3	Klešče za rezanje filamentov	24	Klešče v obliki črke V
4	Klešče za rezanje z dolgim ročajem	25	Trapezne klešče za polmesec
5	Klešče za končno rezanje	26	Klešče za oblikovanje navora
6	Klešče za oblikovanje niti	27	Večnamenske klešče
7	Klešče za rezanje filamentnih trakov	28	Klešče za odcepljanje bukalne cevi
8	Majhne klešče za sončno luno	29	Klešče za ločevanje obročev
9	Proste klešče za vpenjanje kavljev	30	Klešče z dvojnimi navorom
10	Klešče za odstranjevanje nosilcev	31	Klešče za navor z eno glavo
11	Klešče za odstranjevanje nosilcev z dolgo glavo	32	Navpične klešče

12	Pincete za odstranjevanje zadnjega nosilca	33	Vodoravne klešče
13	Klešče KIM	34	Klešče za solze
14	Klešče za odstranjevanje obročev	35	Klešče za prebijanje (6 mm)
15	Klešče za odstranjevanje obročev z dolgim trakom	36	Klešče ch 3mm)
16	Klešče za upogibanje na koncu	37	Nosilna pinceta
17	Klešče za trapezoid	38	Bukalne cevne klešče
18	Horjeve klešče	39	Klešče za držanje igel
19	Klešče za odstranjevanje veziv	40	Oblikovalne klešče z obročem
20	Klešče za upogibanje nikelj-titan	41	Večnamenske klešče
21	Klešče za navpično upogibanje	42	Objemka

struktura izdelka:

Običajno je sestavljen iz klešč kljuna, spojev in ročajev klešč. Čeljusti klešč je mogoče izdelati v različne oblike glede na namen in so praviloma izdelane iz nerjavečega jekla. Zagotovljeno nesterilno.

Uspešnost izdelka:

Ortodontske klešče so klinično pomožno orodje, ki ga zdravniki pogosto uporabljajo v postopku ortodontskega zdravljenja. Ortodontske klešče se lahko uporabljajo za upogibanje ali rezanje ortodontskih ločnih žic, odstranjevanje vezanih nosilcev ali zank in namestitev gumijastih trakov ali prostih kavljjev.

Kontraindikacije:

št.

Navodila

1. Ortodontske klešče morajo uporabljati strokovno usposobljeni zobozdravniki;
2. Po razpakiranju je treba novi izdelek razkužiti. Priporočena metoda razkuževanja je sterilizacija s paro pod pritiskom, to je temperatura 132 ~ 134 °C, čas pa 4 minute.

Previdnostni ukrepi:

Pred in po uporabi razkužite ortodontske klešče, da preprečite navzkrižno okužbo.

Prepričajte se, da je površina instrumenta suha. Dolgotrajna erozija zaradi vlage bo povzročila težave, kot sta razbarvanje in rjavenje telesa objemke.

Če na površini ortodontskih klešč najdete rupe, razpoke itd., jih ne uporabljajte.

Če se določen čas uporabljajo ortodontske klešče z rezili, če postanejo dolgočasne, jih ne uporabljajte.

Namenjen je samo ortodontom. Nenamerna uporaba je prepovedana.

Navodila za vzdrževanje

Pred in po uporabi sterilizirajte vakuumsko parno parno sterilizacijsko omarico in ne dotikajte se jedkih snovi.

Pogoji skladiščenja


Hraniti ga je treba pri sobni temperaturi, relativna vlažnost zraka ne sme presegati 80%, brez jedkih plinov in dobro prezračevanem prostoru.

Garancijska doba:

Ortodontske klešče so zagotovljene za obdobje petih let od datuma odhoda iz tovarne pod pogojem upoštevanja pravil skladiščenja, prevoza, skladiščenja in uporabe. Datum proizvodnje in številka proizvodne serije sta prikazana na embalaži.

Datum priprave: 18. november 2019 Številka različice: A / 0 2019

Oznaka:

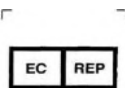

Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10,le Verd,2595AA,

The Hague,Netherlands

E-mail: peter@lotusnl.com

Tel: +31644168999



Innovative Material and Devices, Inc

Building #5, No.615, Fengdeng Road, Jiading District, Shanghai

Tel: 86-21-59156556 Fax:86-21-59156686

www.imdmedical.com

Ko podjetje predloži specifikacijo izdelka in vzorec zasnove nalepke z minimalno prodajno enoto, se zaveže:

Podjetje obljublja, da bo izpolnilo ustrezne zahteve v „Obvestilu o zadevah glede vložitve medicinskih pripomočkov razreda I“ (Obvestilo št. 26, 2014) državne uprave za prehrano in zdravila o „Vzorcih za pripravo navodil za izdelke in minimalnih prodajnih enotah“, Označite številko zapisa v priložniku in nalepki za medicinski pripomoček.

Podjetje obljublja: Priložnik za medicinske pripomočke in zasnova nalepk sta v skladu z zakoni in predpisi.

Inovativni material in naprave, Inc.
18. oktober 2019