

# Priročnik navodil za predhodno varjen pas z ustno cevjo

**Ime proizvoda:** predhodno varjen trak z ustno cevjo

## **Program:**

Ortodonska tuba z trakom se uporablja za ortodontsko zobozdravstvo. V kliničnem delovanju je ortodontična tuba na površini zoba pritrjena tako, da zagotavlja podporo za popravek nepravilno oblikovanih zob in doseže cilj nastavitve zoba.

## **Proizvodna funkcija:**

Poravnanje zob je zelo počasen proces. Potrebuje strokovne zobozdravnike za oblikovanje metod zdravljenja in prehod zob z obstoječega položaja na načrtovano mesto. Zobje se premikajo s silo iz žice, oklepa in bukove cevi, predhodno varjenega pasu z bukavno cevjo, da se zobje premaknejo v načrtovano lego in se sčasoma poravnajo. Uporabljajo ga klinični ortodonti za ortodontsko zdravljenje zob pri človeku.

## **Vrsta in specifikacija proizvoda:**

Predhodno varjen trak z buckasto cevjo je razdeljen na dve vrsti: cev z direktno žico in Edgewise. Specifikacije vključujejo Edgewise varjeno cevko, Edgewise varjeno cevko tipa A, varjeno direktno-žično cevko, varjenega hetero-žičnega Rotha in varjenega direktnega McGeeta.

Razdeljeno v različne specifikacije glede na obseg pasu.

## **Lastnosti proizvoda:**

1. Trak pri predhodno varjenem pasu z ustno cevjo mora biti tog.
2. Materiali ortodontične tube z obročem sta 17-4ph in 06C19Ni10, ki sta v skladu z določbami GB/t1220-2007 iz nerjavnega jekla in sta dobri biokompatibilnosti.
3. Potrebna je moč varjenja med trakom in ustno cevjo.

## **Namesti in uporabi metodo:**

1. Izdelek je na voljo samo za zobozdravnike z usposabljanjem.
2. Pred uporabo zdravila je treba očistiti zobno površino in razkužiti proizvod.
3. Poseben ortodontski vezivni reagent je treba homogeno prilepiti znotraj pasu.
4. Pravilno namestite trak na zob in počakajte, da se reagent za vezavo posuši.
5. Vsaka navedba proizvoda je narejena za različne zobe. Lahko se prilega samo z načrtovanim zobom. Kakršna koli zloraba ne bo dosegla cilja zdravljenja. Poleg tega lahko temu rečemo napačna okluzija.
6. Ko se pas med obdelavo zniža, mora biti reagent, prilepljen na novo, enak sklic in tip istega proizvajalca.
7. Po zdravljenju mora biti odstranjevanje zdravila pod navodili zobozdravnikov, da bi se izognili poškodbam bolnika.
8. Izdelek se lahko vari z drugimi ortodontskimi pripomočki. Vendar je moč varjenja potrebna, da se prepreči padec.

### **Skrb za uporabo za proizvod z različno vrsto in specifikacijo:**

1. Ker predhodno varjen trak z ustno cevjo za direktno žico ni nastavljen kot, mora zobozdravnik ročno upogniti žico na ustreznem mestu žice, da se zagotovi, da sta položaj in kot proizvoda skladna z vsakim zobom.

2. Ker je bil kot predhodno varjenega traku z buckasto cevjo za navito žico nastavljen, zobarju ni treba upogniti žice. Običajna profilna žica je na voljo, ki ustreza položaju in kotu izdelka, tako da se žico preprosto vstavi v luknjo izdelka.

### **Pristojnosti:**

1. Pred uporabo je treba razkužiti proizvod. Normalno pranje in/ali čiščenje z alkoholom ne bo spremenilo barve ali profila proizvoda in ne bo vplivalo na rezultate zdravljenja.

2. Med zdravljenjem ni dovoljeno gristi trdih živil. To lahko spusti produkt.

3. Izdelek se uporablja enkrat in se ne sme ponavljati.



### **Kontraindikacije:**

Pacient je alergičen na nerjavno jeklo.



Proizvod se lahko uporablja samo enkrat. Ponovitev uporabe ni dovoljena.

**Shranjevanje:** Shranjujte v nejedki atmosferi in prezračnem okolju


**Rok uporabe:** tri leta. Datum izdelave in številka serije sta označena na paketu

Version: A/2 2020-12

### **Označi:**



Lotus NL B.V.

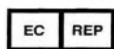

Koningin Julianaplein 10, le Verd, 2595AA,  
Haag, Nizozemska



E-mail: peter@lotusnl.com

Tel: +3164416899



Inovativni material in naprave, Inc.

Zgradba #5, št. 615, Fengdeng Road, Jiading District, Shanghai



Telefon: 86-21-59156556 Faks: 86-21-5915686

www.imdmedical.com