

## Příručka s návodem k jazykové sponě

**Název produktu:** jazyková spona

**Použití funkce produktu:** vhodné pro použití jako funkční ortodontický aparát během ortodontické léčby.

**Specifikace modelu produktu:**

Podle specifikací jsou jazykové spony rozděleny na spony s vázanými jazyky a svařované jazykové spony.

**Složení struktury produktu:** Spona s jazykem je vyrobena z materiálu nerezové oceli 06Cr19Ni10 (304) a její základní struktura je složena z těla spony s jazykem a zadního listu. Vložte jej na určitou část jazyka, která má být opravena (typ lepení), nebo ji bodově přivařte pomocí prstence (typ svařování) na určitou část jazyka a pro trakci použijte pružný drát nebo gumičky dosáhnout účelu opravy.

Hmotnostní podíl chemického složení spony na straně jazyka splňuje požadavky GB / T1220-2007 „Nerezová tyč“. (Jak je znázorněno na obrázku níže, jednotka%)

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni
≤0.08	≤1	≤2	≤0.045	≤0.03	18-20	8-11

Procentní hmotnostní podíl ostatních stopových prvků kadmia, berylia a olova ve výrobku není větší než 0,02% a hmotnostní podíl niklu ve výrobku není větší než 11%.

**Výkon produktu:**

Fyzikální vlastnosti:

Povrch jazykové spony by měl být jasný, bez skvrn, prasklin, okrajů, defektů nebo deformací; spodní síťka lepicí jazykové spony by měla být čistá, čistá a bez cizích látek; za běžných podmínek použití by měl být povrch nemělo by dojít k zbarvení nebo korozi; drsnost povrchu Ra by měla být  $\leq 0,8 \mu\text{m}$ ; jazyková spona by měla mít určité mechanické vlastnosti. navařená jazyková spona by měla být přivařena k lehkému kroužku pásu, působit silou 20 N po dobu 1 minuty a sledovat jazyková strana s pouhými očima Spona nemá zjevnou deformaci; lepicí jazyková spona je nalepena na povrch skloviny a po dobu 1 minuty působí síla 30N. Při pozorování pouhým okem nedochází k zjevné deformaci jazykové spony.

**Rozsah použití:**

Je vhodný k použití jako funkční ortodontický aparát během ortodontické léčby ke korekci torze a náklonu zubů.

**Instrukce:**

1. Před použitím očistěte povrch zubu a produkt očistěte. Doporučená metoda čištění je: pravidelné čištění nebo otření alkoholem.
2. K přilepení tohoto produktu (typ lepení) k odpovídajícímu povrchu zubu použijte smaltované lepidlo, které odpovídá specifikaci; tento produkt (typ svařování) je lékařem přivařen na stranu jazyka prstencem nebo použit přímo předvářený pásový kroužek vyrobený výrobcem.
3. Vložte pružný drát nebo gumičku do jazykové spony, abyste dosáhli trakce a účelu korekce.

**Opatření:**

1. Detoxikujte před použitím tohoto produktu.

2. Rutinní čištění nebo tření alkoholem, po čištění nedojde ke změně barvy ani tvaru a účinek korekce nebude ovlivněn.
3. Při používání tohoto produktu zkuste nejíst tvrdé jídlo, abyste zabránili jeho vypadnutí.
4. Vysokoteplotní a tepelná sterilizace běžných dentálních nástrojů neovlivní výkon jazykové spony.

**Logo:**

Tento produkt používají pouze lékaři

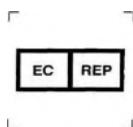


Tento produkt lze použít pouze jednou, nelze jej opakovaně použít.

**Způsob skladování:** Skladujte v nekorozivním plynném, větraném prostředí.。

**Záruční doba:** Balená jazyková spona má záruční dobu 3 roky od data dodání, s výhradou pravidel pro skladování, přepravu, skladování a použití. Datum výroby a číslo šarže jsou uvedeny na štítku obalu.

**Datum přípravy:** 2. května 2017

**Označit:**

Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10, le Verd, 2595AA,

Haag, Nizozemsko

E-mail: peter@lotusnl.com

Tel: +31644168999



Innovative Material and Devices, Inc

Building #5, No.615, Fengdeng Road, Jiading District, Shanghai

Tel: 86-21-59156556 Fax:86-21-59156686

www.imdmedical.com