

Návodná príručka pre vopred zvárané pásmo s perálnou rúrou

Name of product: Pre-welded band with buccal tube

Aplikácia:

Ortodontická ústna rúrka s páskom sa používa na ortodontickú zubárstvu. V klinickej operácii je ortodontická bučná rúrka na povrchu zubov pripevnená tak, aby podporila korekciu nesprávnych zubov a dosiahla cieľ zosúladenia zubov.

Funkcia výrobku:

Zobrazovanie zubov je veľmi pomalý proces. Potrebuje odborných zubárov, aby navrhli metódy ošetrovania a presunuli zuby z existujúcej pozície do plánovanej pozície. Zobné lieky musia pohybovať zuby silou z drôtu, zátvorky a ústnej trubice, vopred zváraného pásma s ústnou trubicou, aby sa zuby mohli pohybovať do konštruovanej polohy a nakoniec zosúladiť zuby. Používajú ho klinickí ortodontisti na ortodontickú liečbu ľudskej zubnosti.

Typ a špecifikácia výrobku:

Predzvárané pásmo s ústnou rúrkou sa rozdelia na dva typy: priamy drôt a ručná rúrka. Špecifikácie zahŕňajú zvárateľnú rúrku, zvárateľnú rúrku typu A, zvárateľnú priamych drôtov, zvárateľnú priamych drôtov a zvárateľnú priamych drôtov McBeTr.

Rozdelené na rôzne špecifikácie podľa okruhu pásma.

Vlastnosti výrobku:

1. Pásmo v predzváranom pásme s ústnou rúrkou by malo byť pevné.

2. Materiály ortodontickej ústnej rúry s kruhom sú 17-4ph a 06Cr19Ni10, ktoré sú v súlade s ustanoveniami GB/ t1220-2007 prúty z nehrdzavejúcej ocele a majú dobrú biokompatibilitu.

3. Potrebná je zváracia sila medzi páskom a ústnou rúrkou.

Metóda inštalácie a používania:

1. Výrobok je dostupný len pre zubárov so školením.

2. Pred použitím výrobku sa musí čistiť povrch zubov a výrobok sa musí čistiť a dezinfikovať.

3. Osobitné ortodontické spojovacie činidlo by sa malo homogénne vložiť do pásma.

4. Správne umiestnite pásmo k zubom a čakajte na sucho spojovacieho činidla.

5. Každý odkaz na výrobok je navrhnutý pre rôzne zuby. It can only fit designed tooth.

Akékoľvek zneužitie nespĺňa cieľ liečby. Okrem toho môže nazvať nesprávnu oklúziou.

6. Keď sa pásmo počas ošetrovania zníži, opakovane nasadené činidlo by malo byť rovnakým referenčným a typom rovnakého výrobcu.

7. Po liečbe má byť odstránenie lieku na pokyny zubárov, aby sa zabránilo akémukoľvek zraneniu pacienta.

8. Výrobok je povolený zväzať inými ortodontickými príslušenstvami. Na zabránenie pádu sa však vyžaduje zváracia sila.

Opatrenia na používanie výrobku s odlišným typom a špecifikáciou:

1. Keďže vopred zvárané pásmo s ústnou rúrkou pre priamy drôt nie je nastavené s uhlom, zubár musí zvrátať drôt na príslušnom mieste drôtu rukami, aby sa zabezpečilo, že poloha a uhol výrobku sú v súlade s každým zubom.

2. Vzhľadom na to, že bol nastavený uhol vopred zváraného pásma s ústnou rúrkou pre okrajový drôt, zubár nemusí zvrátať drôt. Je k dispozícii normálny profilový drôt, ktorý je vhodný s polohou a uhlom výrobku prostredníctvom jednoduchého vloženia drôtu do diery výrobku.

Opatrenia:

1. Pred použitím je potrebné vykonať dezinfekčnú liečbu výrobku. Normálne umývanie a/alebo čistenie alkoholom nezmení farbu alebo profil výrobku a nebude mať vplyv na výsledky liečby.

2. Počas liečby sa nesmie uhryznúť tvrdé potraviny. Môže to vypadnúť.

3. Výrobok sa používa raz a nesmie sa opakovať.



Kontraindikácie:

Pacient alergický na nehrdzavejúcu oceľ.



Liek sa môže používať len raz. Opakované použitie nie je povolené.

Uchovávanie: Uchovávať v nekorozívnej atmosfére a ventilovanom prostredí


Lehota uplynutia: 3 roky. Dátum výroby a číslo dávky sú označené na obale

Version: A/2 2020 – 2012

Poznámka:



Lotus NL B. V.

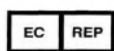

Koningin Julianaplein 10, le Verd, 2595AA,

Haag, Holandsko



E-mail: peter@lotusnl.com

Tel: +31644168999



Inovatívny materiál a zariadenia, Inc.

Budova č. 5, č. 615, Fengdeng Road, Jiading District, Shanghai

Tel: 86-21-59156556 Fax: 86-21-59156686

www.imdmedical.com