

Návod na použitie so sponou v jazyku

Názov produktu: lingválna spona

Použitie funkcie produktu: vhodné na použitie ako funkčný ortodontický aparát počas ortodontickej liečby.

Špecifikácia modelu produktu:

Podľa špecifikácií sa jazykové spony rozdeľujú na spojené jazykové spony a zvárané jazykové spony.

Zloženie štruktúry výrobku: Spona s jazykom je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 06Cr19Ni10 (304) a jej základná štruktúra je zložená z tela a spony. Nalepte ho na určitú časť strany zuba, ktorá sa má opraviť (typ spojenia), alebo ho bodovo privarte krúžkom (typ zvárania) na určitú časť jazyka a na ťah použite elastický drôt alebo gumičky dosiahnuť účel opravy. Hmotnostný zlomok chemického zloženia spony na strane jazyka spĺňa požiadavky GB / T1220-2007 „Tyč z nehrdzavejúcej ocele“. (Ako je znázornené na obrázku nižšie, jednotka%)

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni
≤0.08	≤1	≤2	≤0.045	≤0.03	18-20	8-11

Percentuálny hmotnostný podiel ostatných stopových prvkov kadmia, berýlia a olova vo výrobku nie je vyšší ako 0,02% a hmotnostný percentuálny podiel niklu vo výrobku nie je vyšší ako 11%.

Výkon produktu:

Fyzikálne vlastnosti:

Povrch jazykovej spony by mal byť jasný, bez škvŕn, prasklín, hrán, defektov alebo deformácií; spodná sieťka lepiacej jazykovej spony by mala byť čistá, čistá a bez cudzích látok; za normálnych podmienok používania by mala byť povrchová nemalo by dôjsť k zmene farby alebo korózii; hodnota drsnosti povrchu Ra by mala byť $\leq 0,8 \mu\text{m}$; lingválna spona by mala mať určité mechanické vlastnosti. Zváraná lingválna spona by mala byť privarená k ľahkému krúžku pásu, pôsobiť silou 20 N po dobu 1 minúty a sledovať jazyková strana s voľným okom Spona nemá zjavnú deformáciu; lepiaca jazyková spona sa nalepí na povrch skloviny a po dobu 1 minúty sa na ňu pôsobí silou 30 N. Pozorovaním voľným okom nedochádza k zjavnej deformácii lingválnej spony.

Pôsobnosť:

Je vhodný na použitie ako funkčný ortodontický aparát počas ortodontickej liečby na korekciu torzie a naklonenia zubov.

Inštrukcie:


1. Pred použitím očistite povrch zubov a produkt očistite. Odporúčaná metóda čistenia je: pravidelné čistenie alebo trenie alkoholom.
2. Na prilepenie tohto produktu (typ spojenia) na zodpovedajúci povrch zuba použite smaltované lepidlo, ktoré vyhovuje špecifikácii; tento výrobok (typ zvárania) je privarený na bočnú časť jazyka krúžkom od lekára alebo priamo použitý vopred zváraný pásikový krúžok vyrobený výrobcom.
3. Vložte pružný drôt alebo gumičku do jazykovej spony, aby ste dosiahli trakciu a účel korekcie.


Opatrenia:

1. Detoxikujte pred použitím tohto produktu.
2. Rutinné čistenie alebo trenie alkoholom, po vyčistení nedôjde k nijakej zmene farby ani tvaru a korekčný efekt to neovplyvní.

3. Pri používaní tohto produktu sa snažte, aby ste nejedli tvrdé jedlo, aby ste zabránili vypadnutiu.
4. Vysokoteplotné a tepelné sterilizačné podmienky bežných dentálnych nástrojov neovplyvnia funkčnosť jazykovej spony.

Logo:

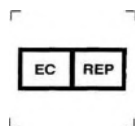
 Tento výrobok používajú iba lekári

 Tento produkt je možné použiť iba raz, nie na opakované použitie.

Spôsob skladovania: Skladujte v nekorozívnom plynnom, vetranom prostredí.

Záručná doba: Na zabalenú jazykovú sponu je poskytovaná záručná doba 3 roky od dátumu dodania v súlade s pravidlami skladovania, prepravy, skladovania a používania. Dátum výroby a číslo šarže sú uvedené na obale.

Termín prípravy: 2. mája 2017

Značka:

Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, le Verd, 2595AA,
Haag, Holandsko
E-mail: peter@lotusnl.com
Tel: +31644168999



Inovatívny materiál a zariadenia, Inc.
Building # 5, No. 615, Fengdeng Road, Jiading District, Shanghai
Tel: 86-21-59156556 Fax: 86-21-59156686
www.imdmedical.com