

Návod na použitie ortodontických klieští

Názov produktu: Ortodontické kliešte

Rozsah použitia: používa sa na rezanie, upínanie, ohýbanie oblúkového drôtu alebo ligačného drôtu, odstraňovanie spojovacích svoriek, páskových slučiek atď. V procese ortodontického ošetrovania.

Špecifikácia modelu produktu:

Ortodontické kliešte sa delia na dva typy, vykladané a nevykladané. Modely klasifikované podľa tvaru hlavy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Serial	Model	Serial	Model
1	Koncové rezacie kliešte	22	Tri kliešte na zobák
2	Koncové rezacie kliešte s dlhou rukoväťou	23	Kliešte na rezanie hrubého drôtu
3	Kliešte na rezanie vlákien	24	Kliešte v tvare V
4	Koncové rezacie kliešte s dlhou rukoväťou	25	Trapézové polmesiacové kliešte
5	Koncové rezacie kliešte	26	Kliešte tvoriace krútiaci moment
6	Kliešte tvoriace vlákno	27	Multifunkčné kliešte
7	Kliešte na rezanie pásky vytvárajúce vlákna	28	Kliešte na oddeľovače bukálnych rúrok
8	Malé kliešte na slnečný mesiac	29	Kliešte na deliace krúžky
9	Upínacie kliešte s háčikom zadarmo	30	Obojstranné kliešte na krútiaci moment
10	Kliešte na demontáž konzoly	31	Jednohlavé kliešte na krútiaci moment
11	Sťahovacie kliešte s dlhou hlavou	32	Vertikálne kliešte
12	Kliešte na odstránenie	33	Horizontálne kliešte

	zadnej konzoly		
13	Kliešte KIM	34	Kliešte na slzy
14	Kliešte na odstránenie krúžkov	35	Dierovacie kliešte (6 mm)
15	Dlhé kliešte na odstránenie krúžku na čelenke	36	Dierovacie kliešte (3 mm)
16	Koncové kliešte ohýbajte	37	Konzolová pinzeta
17	Trapézové kliešte	38	Kliešte na bukálnu trubicu
18	Horove kliešte	39	Kliešte na pridržiavanie ihiel
19	Kliešte na odstránenie spojiva	40	Tvarovacie kliešte s krúžkom
20	Kliešte na ohýbanie nikel-titánu	41	Multifunkčné kliešte
21	Kliešte na zvislé ohýbanie	42	Svorka

štruktúra produktu:

Zvyčajne sa skladá zo zobáku klieští, kĺbov a rukoväti klieští. Čeluste klieští môžu byť vyrobené podľa rôznych účelov a sú zvyčajne vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Poskytované nesterilné.

Výkon produktu:

Ortodontické kliešte sú klinické pomocné nástroje, ktoré lekári často používajú pri ortodontickej liečbe. Ortodontické kliešte možno použiť na ohýbanie alebo rezanie drôtov ortodontického oblúka, odstránenie spojených konzol alebo slučiek pásov a umiestnenie gumičiek alebo voľných hákov.

Kontraindikácie:

č.

Inštrukcie

1. Ortodontické kliešte musia používať profesionálne vyškolení zubní lekári;
2. Nový výrobok musí byť po vybalení dezinfikovaný. Odporúčanou dezinfekčnou metódou je tlaková sterilizácia parou, to znamená, že teplota je 132 ~ 134 ° C a čas sú 4 minúty.

Opatrenia:

Ortodontické kliešte pred a po použití vydezinfikujte, aby ste predišli krížovej infekcii.

Uistite sa, že je povrch prístroja suchý. Dlhodobá erózia pôsobením vlhkosti spôsobí problémy, ako je

zmena farby a hrdzavenie tela svorky.

Ak na povrchu ortodontických klieští nájdete otrepy, praskliny atď., Mali by ste ich prestať používať.

Ak sa ortodontické kliešte s čepeľami používajú určitý čas a ak sa otupia, prestaňte ich používať.

Je určený na ortodontické použitie iba pre ortodontistov. Neúmyselné použitie je zakázané.

Pokyny na údržbu

Na sterilizáciu pred a po použití použite vákuovú parnú sterilizačnú komoru a nedotýkajte sa korozívnych látok.

Podmienky skladovania


Skladovať by sa malo pri izbovej teplote, relatívna vlhkosť vzduchu nie je vyššia ako 80%, žiadny korozívny plyn a dobre vetraná miestnosť.

Záručná doba:

Na ortodontické kliešte sa poskytuje záruka päť rokov od dátumu opustenia továrne za podmienky dodržania pravidiel skladovania, prepravy, skladovania a používania. Dátum výroby a číslo výrobnej šarže sú uvedené na obale.

Dátum kompilácie: 18. novembra 2019 Číslo verzie: A / 0 2019

Značka:

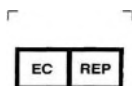

Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10,le Verd,2595AA,

The Hague,Netherlands

E-mail: peter@lotusnl.com

Tel: +31644168999



Innovative Material and Devices, Inc

Building #5, No.615, Fengdeng Road, Jiading District, Shanghai

Tel: 86-21-59156556 Fax:86-21-59156686

www.imdmedical.com

Keď spoločnosť predloží špecifikáciu produktu a minimálnu vzorku dizajnu štítku predajnej jednotky, urobí nasledovné záväzky:

Spoločnosť sľubuje, že bude dodržiavať príslušné požiadavky „Oznámenia o veciach týkajúcich sa registrácie zdravotníckych pomôcok triedy I“ (oznámenie č. 26, 2014) Štátneho úradu pre potraviny a liečivá týkajúce sa „Príručky k výrobkom a vzorových vzorov označení minimálnej predajnej jednotky“. , Označte číslo záznamu v príručke a štítku zdravotníckej pomôcky.

Spoločnosť sľubuje: Príručka zdravotníckeho prístroja a dizajn štítku sú v súlade so zákonmi a predpismi.

Inovatívny materiál a zariadenia, Inc.

18. októbra 2019

