

## Nyelvi csat használati útmutató

**Termék neve:** nyelvi csat

**A termék funkcióinak használata:** alkalmas fogszabályozó készülékként történő alkalmazásra a fogszabályozó kezelés során.

**Termékmodell specifikáció:**

A specifikációk szerint a nyelvi csatok fel vannak osztva ragasztott nyelvű csatokra és hegesztett nyelvű csatokra.

**Termékszerkezet összetétele:** A nyelvcsat rozsdamentes acélból készült 06Cr19Ni10 (304) anyagból készül, alapszerkezete a nyelvcsat testéből és a hátlapból áll. Illessze a korrigálni kívánt fog nyelvoldalának egy bizonyos részére (kötési típus), vagy hegeszse rá a nyelv bizonyos részére gyűrűvel (hegesztési típus), és rugalmas huzal vagy gumiszalagok segítségével húzza meg a korrekció céljának elérése.

A nyelvoldali csat kémiai összetételének tömegaránya megfelel a GB / T1220-2007 "Rozsdamentes acél rúd" követelményeinek. (Amint azt az alábbi ábra mutatja, egység%)

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni
≤0.08	≤1	≤2	≤0.045	≤0.03	18-20	8-11

A termékben található egyéb nyomelemek, a kadmium, a berillium és az ólom százalékos tömegaránya nem haladja meg a 0,02% -ot, a termékben pedig a nikkel tömegaránya nem haladja meg a 11% -ot.

**A termék teljesítménye:**

Fizikai tulajdonságok:

A nyelvcsat felületének világosnak, foltoktól, repedésektől, élektől, hibáktól vagy deformációtól mentesnek kell lennie; a ragasztó nyelvcsat alsó hálójának tiszta, tiszta és idegen anyagtól mentesnek kell lennie; normál használati körülmények között a felület nem lehet elszíneződés vagy korrózió; a felületi érdesség Ra értéke  $\leq 0,8 \mu\text{m}$  legyen; a nyelvcsatnak bizonyos mechanikai tulajdonságokkal kell rendelkeznie. A hegesztett nyelvcsatot a heveder gyűrűjéhez kell hegeszteni, 20 percig tartó erőt kell kifejteni 1 percig, és figyelni kell a nyelvi oldal szabad szemmel A csatnak nincs nyilvánvaló alakváltozása; a tapadó nyelvcsatot a zománc felületére ragasztják, és 1 percig 30 N erőt fejtenek ki. Szabad szemmel történő megfigyeléssel nincs nyilvánvaló a nyelvcsat deformációja.

**Hatály:**

Alkalmas funkcionális fogszabályozó készülékként a fogszabályozás során a torzió és a dőlés korrigálására.

**Utasítás:**

1. Használat előtt tisztítsa meg a fog felületét és tisztítsa meg a terméket. Az ajánlott tisztítási módszer: rendszeres tisztítás vagy alkohollal való dörzsölés.
2. A specifikációnak megfelelő zománc ragasztót használjon a termék (ragasztás típusa) a megfelelő fogfelülethez történő ragasztásához; ezt a terméket (hegesztési típus) az orvos a gyűrűvel hegeszti a nyelv oldalához, vagy közvetlenül használja. a gyártó által előhegesztett szalaggyűrű.
3. Helyezze a rugalmas huzalt vagy gumiszalagot a nyelvcsatba a tapadás és a korrekció elérése érdekében.


**Óvintézkedések:**

1. Méregtelenítés a termék használata előtt.

2. Rendszeres tisztítás vagy alkohollal való dörzsölés, a tisztítás után nem történik szín- vagy alakváltozás, és a korrekciós hatást nem befolyásolja.
3. A termék használatakor kérjük, ne igyon kemény ételt, hogy megakadályozza annak leesését.
4. A hagyományos fogászati műszerek magas hőmérsékleti és hősterilizációs körülményei nem befolyásolják a nyelvi csat teljesítményét.

**Logó:**

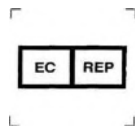
 Ezt a terméket csak orvosok használják

 Ez a termék csak egyszer használható, nem használható fel újra.

**Tárolási módszer:** Nem maró gázban, szellőztetett helyen tárolandó.

**Jótállási idő:** A csomagolt nyelvi csatnak a szállítás dátumától számított 3 év jótállási ideje van, a tárolási, szállítási, tárolási és felhasználási szabályoknak megfelelően. A gyártás dátuma és a tétel száma a csomagolás címkéjén szerepel.

**Az elkészítés időpontja:** 2017. május 02

**Mark:**

Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10, le Verd, 2595AA,

Hága, Hollandia

E-mail: peter@lotusnl.com

Tel: +31644168999



Innovative Material and Devices, Inc

5. épület, No.615, Fengdeng Road, Jiading District, Shanghai

Tel: 86-21-59156556 Fax:86-21-59156686

www.imdmedical.com