

# Pokyny Buccal Tube

**Název produktu: bukální trubice**

## **Zamýšlené použití:**

Bukální trubice se používá k ortodontické léčbě. V klinickém provozu fixujete bukální trubici na obličej zubů, dodávejte podpůrnou sílu pomocí ortodontického ošetření, aby bylo dosaženo účelu vyrovnání zubů.

## **Funkce produktu:**

Ortodontická léčba je během tohoto procesu dlouhý a pomalý; vyžaduje profesionální zubaře, aby se vyrovnal s nevyhlazenými zuby několika metodami, aby se zuby dostaly do správné polohy. Profesionální lékaři používají ortodontické produkty, jako jsou ortodontické držáky, bukální trubice a ortodontické prstencové bukální trubice, k aplikaci různých druhů ortodontických sil na zuby, aby se zuby posunuly do správné polohy a dosáhlo účelu vyrovnání. Používají ho kliničtí ortodontisté k ortodontické léčbě lidského chrupu.

## **Typ produktu, specifikace:**

Bukální tubusové modely jsou rozděleny do dvou typů: Straight-Wire a Edgewise tube. Technické údaje zahrnují Edgewise svařitelnou trubku, Edgewise svařitelný trubice typu A trubice, svařitelného rovný -W IRE trubice, svařitelného přímou Wire Roth a svařitelného přímou Wire McBeTr, vázána na výšku trubice, nosných typ Edgewise A, nosných rovný-Wire trubice, nosných rovný -Wire Roth, spojitelný přímý drát McBeTr.

Podle různých koncepcí a systémů klinické ortodontické léčby je rozdělena do dvou typů: Edgewise a straight-Wire. Každý typ produktu je rozdělen do různých specifikací kvůli způsobu jeho připevnění k zubům a trojrozměrné velikosti.

## **Produkovat výkon:**

1. Bukální trubice má určitou svařitelnou pevnost.
2. Materiál bukální trubice je 17-4ph, 304 nerezová ocel (06Cr19Ni10), v souladu s ustanoveními GB / t1220-2007 nerezové tyče, s dobrou biokompatibilitou.
3. Retenční síla povrchu skloviny by neměla být menší než 30 N, pokud se bukální trubice používá se sklovinou adhesive.

## **Instalační a uživatelská příručka (lepitelná bukální trubice):**

1. Přípravek používá pouze profesionální zubař po zaškolení.
2. Před použitím očistěte povrch zubů, dno bukální trubice a dezinfikujte produkt.
3. Naškrábněte specializované lepidlo rovnoměrně na povrch zubů a na dno bukální trubice.
4. Vložte bukální trubici do povrchu zubů správně a po reakci lepidla ji upevněte.
5. Každá bukální trubice se používá pro určený zub, jinak nedosáhne zamýšleného účinku, dokonce způsobí okluzní poruchu.
6. Během ošetření by bukální trubice mohla při opravě spadnout, měl by si vybrat produkt se stejnou specifikací při stejné výrobě.

7. Po ošetření by mělo být vyjmutí bukální trubice provedeno pod vedením klinického zubaře, aby se předešlo zbytečnému poranění.

#### **Instalační a uživatelská příručka (svařitelná bukální trubice):**

1. Přípravek používá pouze profesionální zubař po zaškolení.
2. Zubař by měl přivařit svařitelnou bukální trubici k páskům, aby se dostala k ortodontickému předsvařitelnému zákazu bukální trubice.
3. Před použitím očistěte povrch zubů, vnitřek ortodontické bandáže a produkt dezinfikujte.
4. Na vnitřní stranu ortodontické trubice rovnoměrně naškrábejte specializované lepidlo.
5. Nasadte na zuby předem svařitelné pásky a po reakci lepidla je upevněte.
6. Každá páska bukální trubice se používá pro určený zub, jinak nedosáhne zamýšleného účinku, dokonce způsobí okluzní poruchu.
7. Během léčby by bukální trubice mohla při opravě spadnout, měl by si vybrat výrobek se stejnou specifikací ve stejné výrobě.
8. Po ošetření by mělo být odstranění bukální trubice provedeno pod vedením klinického zubaře, aby nedošlo ke zbytečnému poranění.
9. Ortodontické příslušenství je dovoleno svařit na páskové trubce, ale mělo by se zajistit, aby svařovací síla zabránila pádu.

#### **Využití pozornosti různých typů, specifikace produktů:**

1. Svařitelná bukální trubice po stranách nemá přednastavený úhel a její základna je hladká, takže je třeba ji přivařit k páskům a ohýbat druhy smyček na ortodontických obloukových drátech, aby byl každý zub ve správné poloze a úhel.
2. Svařitelná bukální trubice Roth & MBT má přednastavený úhel a její základna je hladká, takže je třeba ji přivařit k páskům, ale to eliminuje potřebu ohýbat smyčky, jeden obloukový drát se základním tvarem zvládne každý zub do správné polohy.
3. Spojitelná bukální trubice s okrajem má formát retikulární struktury, takže ji stačí spojit přímo s čelem zubu, ale nemá přednastavený úhel, takže vyžaduje, aby zubař ohnul smyčku na obloukových drátech aby byl každý zub ve správné poloze a úhlu.
4. Spojitelná trubka Roth & MBT bucci má formát retikulární struktury, takže ji stačí lepit přímo na povrch zubu, ale má přednastavený úhel, takže odstraňuje potřebu ohýbat smyčky, jeden obloukový drát s základní formou dokáže každý zub zarovnat do správné polohy.

#### **Pozornost:**

1. Před použitím dezinfikujte.  
Normálně vyčistěte nebo otřete alkoholem bez jakékoli změny barvy po vyčištění a neovlivní to ortodontický efekt.
2. Při používání bukální trubice nejezte tvrdé jídlo, abyste zabránili pádu z bukální trubice.
3. Produkt je pouze na jedno použití, nepoužívejte jej prosím opakovaně.

**Kontraindikace:**

Lidé citliví na nerezovou ocel by měli používat opatrně.


**Označit:**

Produkt je pouze na jedno použití, prosím, nepoužívejte jej znovu.

**Metoda konzervace:** Skladováno v nekorozivním plynu, ventilační prostředí.

**Doba platnosti:** Podmínky produktu jsou 3 roky, zkontrolujte datum výroby na šarži na obalu.

**Verze:** A / 2

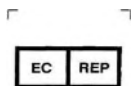

Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10, le Verd, 2595AA,

Haag, Nizozemsko

E-mail: [peter@lotusnl.com](mailto:peter@lotusnl.com)

Tel: +31644168999



Innovative Material and Devices, Inc

Building #5, No.615, Fengdeng Road, Jiading District, Shanghai

Tel: 86-21-59156556 Fax: 86-21-59156686

[www.imdmedical.com](http://www.imdmedical.com)