

Pokyny spoločnosti Buccal Tube

Názov produktu: bukálna trubica

Zamýšľané použitie:

Bukálna trubica sa používa na ortodontické ošetrenie. V klinickej prevádzke zašifujete bukálnu trubicu na tvár zubov pomocou podpornej sily použitej pri ortodontickom ošetrení, aby sa dosiahol účel vyrovnania zubov.

Funkcia produktu:

Ortodontické ošetrenie je počas tohto procesu dlhý a pomalý; to vyžaduje profesionálne Z zubára sa vysporiadať s un-hladký zuby s niekoľkými spôsobmi, tak, aby zuby presunúť do správnej polohy. Profesionálni lekári používajú ortodontické výrobky, ako sú ortodontické konzoly, bukálne trubice a ortodontické prstencové bukálne trubice, na aplikáciu rôznych druhov ortodontických síl na zuby tak, aby sa zuby dostali do správnej polohy a dosiahli účel vyrovnania. Používajú ho klinickí ortodontisti na ortodontické ošetrenie ľudského chrupu.

Typ produktu, špecifikácia:

Modely bukálnej trubice sú rozdelené do dvoch typov: trubica s priamym drôtom a trubica s hranou . Technické údaje zahŕňajú Edgewise zvariteľnou trúbku , Edgewise zvariteľný trubice typu A trubice , svaiteľného rovný -W IRE trubice , svaiteľného priamu Wire Roth a svaiteľného priamu Wire McBeTr, viazaná na výšku trubice, nosných typ Edgewise A, nosných rovný-Wire trubice , nosných rovný -Wire Roth, spájateľný priamy drôt McBeTr.

Podľa rôznych koncepcií a systémov klinickej ortodontickej liečby je rozdelený do dvoch typov: Edgewise a straight-Wire. Každý typ produktu je rozdelený do rôznych špecifikácií kvôli spôsobu jeho pripevnenia k zubom a trojrozmernej veľkosti.

Produkcia výkonu:

1. bukálna trubica má určitú zvariteľnú pevnosť.
2. Materiál bukálnej trubice je nehrdzavejúca oceľ 304 (06Cr19Ni10) 17-4ph, v súlade s ustanoveniami GB / t1220-2007 tyče z nehrdzavejúcej ocele, s dobrou biokompatibilitou.
3. Retenčná pevnosť povrchu skloviny by nemala byť menšia ako 30 N, keď sa bukálna trubica používa so silnou sklovinou.

Inštalčný a užívateľský manuál (Bondable buccal tube):

1. Produkt používa iba profesionálny zubný lekár po zaškolení.
2. Pred použitím očistite povrch zubov, základňu bukálnej trubice a dezinfikujte výrobok.
3. Špeciálne lepidlo rovnomerne načmárajte na povrch zubov a na spodnú časť bukálnej trubice.
4. Vložte bukálnu trubicu do povrchu zubov správne, po reakcii lepidla ju upevnite.

5. Každá bukálna trubica sa používa pre určený zub, inak nedosiahne zamýšľaný účinok, dokonca spôsobí poruchu oklúzie.
6. Počas liečby môže bukálna trubica pri opravách spadnúť, pokiaľ si pri rovnakej výrobe vyberiete produkt s rovnakými špecifikáciami.
7. Po ošetrení by sa mala bukálna trubica odobrať pod vedením klinického zubára, aby sa zabránilo zbytočnému poraneniu.

Inštalčná a užívateľská príručka (zvárateľná bukálna trubica):

1. Produkt používa iba profesionálny zubný lekár po zaškolení.
2. Zubný lekár by mal zvärať zvárateľnú bukálnu trubicu k pásom, aby sa dostala k ortodontickému predvariteľnému zázaku bukálnej trubice.
3. Pred použitím očistite povrch zubov, vnútro ortodontickej trubice a výrobok dezinfikujte.
4. Špeciálne lepidlo rovnomerne naškriabajte na vnútornú stranu ortodontickej trubice.
5. Predvariteľné pásy nasadte na zuby a po reakcii lepidla ich upevnite.
6. Každá bukálna trubica sa používa pre určený zub, inak nedosiahne zamýšľaný účinok, dokonca spôsobí poruchu oklúzie.
7. Počas liečby by bukálna trubica mohla pri opravách spadnúť, pokiaľ si pri rovnakej výrobe vyberiete produkt s rovnakými špecifikáciami.
8. Po ošetrení by malo byť odstránenie bukálnych rúrok urobené pod vedením klinického zubára, aby sa zabránilo zbytočnému poraneniu.
9. Ortodontické príslušenstvo je dovolené zvärať na páskovej trubici, malo by sa však dbať na to, aby zväracia sila zabránila pádu.

Využitie pozornosti rôznych typov, technické parametre výrobkov:

1. Zvárateľná bukálna trubica po stranách nemá vopred nastavený uhol a jej základňa je hladká, takže je potrebné ju privariť na pásy a ohýbať druhy slučiek na ortodontických oblúkových drôtoch, aby bol každý zub v správnej polohe a uhol.
2. Zvárateľná bukálna trubica Roth & MBT má vopred nastavený uhol a jej základňa je hladká, takže je potrebné ju privariť na pásy, ale to eliminuje potrebu ohýbania slučiek, jeden oblúk so základným tvarom dokáže vyrobiť každý zub zarovnať do správnej polohy.
3. Pripojiteľná bukálna trubica po stranách má formát retikulárnej štruktúry, takže sa stačí spojiť priamo s tvárou zuba, ale nemá vopred nastavený uhol, takže vyžaduje, aby zubár ohol slučku na oblúkových drôtoch, aby bol každý zub v správnej polohe a uhle.
4. Spojiteľná buklová trubica Roth & MBT má formát retikulárnej štruktúry, takže ju stačí spojiť priamo s tvárou zuba, ale má vopred nastavený uhol, takže odstraňuje potrebu ohýbania slučiek, jeden oblúk s základná forma umožňuje, aby sa každý zub vyrovnal do správnej polohy.

Pozor:

1. Pred použitím vydezinfikujte.

Normálne vyčistite alebo utrite liehom bez akejkoľvek zmeny farby po vyčistení a neovplyvní to ortodontický efekt.

2. Pri použití bukálnej trubice nejedzte tvrdé jedlo, aby ste zabránili pádu z bukálnej trubice.
3. Produkt je iba na jedno použitie, nepoužívajte ho opakovane.



Kontraindikácie:

Ľudia citliví na nehrdzavejúcu oceľ by mali používať opatrne.

Značka:




Produkt je iba na jedno použitie, prosím, nepoužívajte ho opakovane.

Metóda konzervácie: Skladované v nekorozívnom plyne, vo vetracom prostredí.

Doba platnosti: Podmienky produktu sú 3 roky, prosím, skontrolujte číslo šarže na obale pre dátum výroby.

Verzia: A / 2

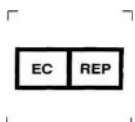

Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, le Verd, 2595AA,
Haag, Holandsko
E-mail: peter@lotusnl.com
Tel: +31644168999



Inovatívny materiál a zariadenia, Inc
Building #5, No.615, Fengdeng Road, Jiading District, Shanghai
Tel: 86-21-59156556 Fax: 86-21-59156686
www.imdmedical.com