

Upute za uporabu ortodontskih klešta

Naziv proizvoda: Ortodontske pincete

Područje primjene: koristi se za rezanje, stezanje, savijanje lučne žice ili žice za podvezivanje, uklanjanje spojnih nosača, trakastih traka itd. U procesu ortodontskog liječenja

Specifikacije modela proizvoda:

Ortodontske stezaljke dijele se na dvije vrste, umetnute i neobložene. Modeli klasificirani prema obliku glave navedeni su u sljedećoj tablici:

Serijski	Model	Serijski	Model
1	Kraj klešta za cijepanje	22	Tri kliješta na kljunu
2	Klešta za cijepanje na kraju s dugom drškom	23	Klešta za rezanje debele žice
3	Klešta za rezanje vlakana	24	Klešta u obliku slova V.
4	Klešta za cijepanje na kraju s dugom drškom	25	Klešta trapezoidna polumjeseca
5	Kraj klešta za cijepanje	26	Klešta za okretni moment
6	Klešta za oblikovanje vlakana	27	Višenamjenske kliješta
7	Kliješta za rezanje vlakana koja oblikuju traku	28	Klešta za bukalne cijevi
8	Male kliješta na solarnom mjesecu	29	Klešta za rezanje
9	Klešta za stezanje s kukom besplatno	30	Obostrano klešta za okretni moment
10	Klešta za uklanjanje držača	31	Klešta za okretni moment s jednom glavom

11	Klešta za uklanjanje držača s dugom glavom	32	Okomite kliješta
12	Klešta za uklanjanje stražnjeg nosača	33	Horizontalne kliješta
13	KIM kliješta	34	Suzne pincete
14	Klešta za uklanjanje prstena	35	Klešta za probijanje (6 mm)
15	Duge kliješta za uklanjanje prstena na traci	36	Klešta za probijanje (3 mm)
16	Završite kliješta za savijanje	37	Držać pincete
17	Klešta trapezoidna	38	Pincete za bukalnu cijev
18	Horova kliješta	39	Klešta za držanje igala
19	Klešta za uklanjanje veziva	40	Posebne kliješta za kuku za vuču
20	Klešta za savijanje nikla i titana	41	Višenamjenske kliješta
21	Klešta za vertikalno savijanje	42	Stezaljka

struktura proizvoda:

Obično se sastoji od klešta kljuna, spojeva i ručke kliješta. Čeljusti kliješta mogu se izrađivati u različite oblike prema namjeni, a uglavnom su izrađene od nehrđajućeg čelika. Pod uvjetom da nije sterilna.

Izvedba proizvoda:

Ortodontske pincete klinički su pomoćni alati koje liječnici često koriste u procesu ortodontskog liječenja. Ortodontske pincete mogu se koristiti za savijanje ili presijecanje žica za ortodontski luk, uklanjanje spojenih nosača ili petlji i postavljanje gumenih vrpca ili slobodnih kukica.

Kontraindikacije:

Ne.

Upute

1. Ortodontske pincete moraju koristiti profesionalno obučeni stomatolozi;

2. Novi proizvod nakon depakiranja mora se dezinficirati. Preporučena metoda dezinfekcije je sterilizacija parom pod pritiskom, odnosno temperatura je 132 ~ 134 °C, a vrijeme je 4 minute.

Mjere predostrožnosti:

Dezinficirajte ortodontske pincete prije i nakon uporabe kako biste spriječili unakrsnu infekciju.

Pazite da je površina instrumenta suha. Dugotrajna erozija vlagom uzrokovat će probleme poput promjene boje i hrđanja tijela stezaljke.

Ako na površini ortodontskih pinceta nađete provrte, pukotine itd., Prestanite ih koristiti.

Ako se ortodontske pincete s oštricama koriste neko vrijeme, ako postanu dosadne, prestanite ih koristiti.

Namijenjen je samo ortodontima za ortodontsku upotrebu. Nenamjerna uporaba je zabranjena.

Upute za održavanje

Koristite vakuumski ormar za parni sterilizator za sterilizaciju prije i nakon uporabe i nemojte kontaktirati korozivne tvari.

Uvjeti skladištenja


Treba ga čuvati na sobnoj temperaturi, relativna vlažnost zraka nije veća od 80%, nema korozivnih plinova i dobro prozračenu prostoriju.

Garantni rok:

Ortodontska kliješta jamče se pet godina od datuma napuštanja tvornice, pod uvjetom poštivanja pravila skladištenja, prijevoza, skladištenja i uporabe. Datum proizvodnje i broj proizvodne serije prikazani su na naljepnici pakiranja.

Datum sastavljanja: 18. studenog 2019. Broj verzije: A / 0 2019

Ocjena:

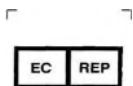

Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10,le Verd,2595AA,
The Hague,Netherlands
E-mail: peter@lotusnl.com
Tel: +31644168999



Innovative Material and Devices, Inc
Building #5, No.615, Fengdeng Road, Jiading District, Shanghai
Tel: 86-21-59156556 Fax:86-21-59156686
www.imdmedical.com

Kada tvrtka preda specifikaciju proizvoda i uzorak dizajna naljepnice s minimalnom prodajnom jedinicom, preuzima sljedeće obveze:

Tvrtka obećava da će se pridržavati relevantnih zahtjeva „Obavijesti o pitanjima u vezi s prijavom medicinskih proizvoda klase I“ (Obavijest br. 26, 2014.) Državne uprave za hranu i lijekove o „Uzorcima proizvoda i priručnicima za dizajn minimalne prodajne jedinice na uzorku”, Označite broj zapisa u priručniku i naljepnici medicinskog proizvoda.

Tvrtka obećava: Priručnik za medicinske uređaje i dizajn naljepnica u skladu su sa zakonima i propisima.

Inovativni materijal i uređaji, Inc
18. listopada 2019