

# A Buccal Tube utasításai

**Termék neve: Bukkális cső**

## **Rendeltetésszerű használat:**

A bukkális csövet fogszabályozó kezelésre használják. A klinikai műtét során rögzítse a szájüregtet a fogak arcára, a fogszabályozó kezeléshez használva a támasztó erőt, hogy elérje a fogak igazításának célját.

## **Termékfunkció:**

A fogszabályozó kezelés hosszú és lassú folyamat, ebben a folyamatban; megköveteli, hogy a professzionális z fogorvos több módszerrel kezelje a sima fogakat, hogy a fogak a megfelelő helyzetbe kerüljenek. A hivatásos orvosok olyan fogszabályozó termékeket használnak, mint a fogszabályozó konzolok, a bukkális csövek és a fogszabályozó gyűrűs bukkális csövek, hogy különféle fogszabályozó erőket alkalmazzanak a fogakon, hogy a fogakat megfelelő helyzetbe hozzák és elérjék az igazítás célját. A klinikai fogszabályozók használják az emberi fogazat fogszabályozásában.

## **Termék típusa, specifikáció:**

A buccalis csőmodellek két típusra oszthatók: Straight-Wire és Edgewise csövekre . A specifikációk közé tartozik az Edgewise hegeszthető cső , az Edgewise hegeszthető cső A típusú cső , hegeszthető egyenes -W ire cső , hegeszthető egyenes huzal Roth és hegeszthető egyenes huzal McBeTr, rögzíthető Edgewise cső, rögzíthető Edgewise A típusú, rögzíthető egyenes huzal cső , egyenesen rögzíthető -Wire Roth, köthető egyenes huzal McBeTr.

Különböző klinikai fogszabályozó kezelési koncepciók és rendszerek szerint két típusra oszlik: Edgewise és straight-Wire. Minden terméktípus különféle specifikációkra oszlik a fogakhoz való rögzítés módja és a háromdimenziós méret miatt.

## **Teljesítmény előállítása:**

1. A bukkális csőnek van némi hegeszthetősége.
2. A bukkális cső anyaga 17-4ph, 304 rozsdamentes acél (06Cr19Ni10), a GB / t1220-2007 rozsdamentes acél rúd rendelkezéseinek megfelelően, jó biokompatibilitással.
3. A zománcfelület retenciós szilárdságának legalább 30 N-nak kell lennie, ha a szájüregi csövet zománc tapadóval használják.

## **Telepítési és felhasználói kézikönyv (Bondable buccal tube):**

1. A terméket csak a kiképzés után használja a hivatásos fogorvos.
2. Használat előtt tisztítsa meg a fogak felületét, a szájüreg alapját, és fertőtlenítse a terméket.
3. A speciális ragasztót egyenletesen firkálja a fogak felületére és a szájüreg tövére.
4. Helyezze helyesen a szájüregtet a fogak felületébe, majd rögzítse, miután a ragasztó reagál.

5. Minden bukkális csövet használnak a kijelölt foghoz, különben nem éri el a kívánt hatást, még az okklúziós rendellenességet is okozza.
6. A kezelés során a bukkális cső leeshet, ha javításkor az azonos gyártmányú, azonos specifikációjú terméket kell választania.
7. A kezelés után a bukkális csövet a klinikai fogorvos irányításával kell eltávolítani, hogy elkerüljék a felesleges sérüléseket.

#### **Telepítési és felhasználói kézikönyv (hegeszthető szájüreg):**

1. A terméket csak a kiképzés után használja a hivatásos fogorvos.
2. A fogorvosnak meg kell hegesztenie a hegeszthető szájüregi csövet a szalagokhoz, hogy az az orthodontikus előre hegeszthető betiltja a szájüreget.
3. Használat előtt tisztítsa meg a fogak felületét, a fogszabályozó szalagok csövét és fertőtlenítsa a terméket.
4. A speciális ragasztót egyenletesen firkálja a fogszabályozó szalagok belső oldalára.
5. Helyezze az előre hegeszthető szalagokat a fogakra, majd rögzítse, miután a ragasztó reagál.
6. Minden szalag bukkális csövet használnak a kijelölt foghoz, különben nem éri el a kívánt hatást, még az okklúziós rendellenességet is okozza.
7. A kezelés során a bukkális csövek esetleg leeshetnek, ha javításkor ugyanazon specifikációjú terméket kell kiválasztani ugyanabban a gyártásban.
8. A kezelés után a szalagok bukkális csövét a klinikai fogorvos irányításával kell eltávolítani, hogy elkerüljék a felesleges sérüléseket.
9. A fogszabályozó kiegészítők hegeszthetők a szalagcsövön, de meg kell győződniük arról, hogy a hegesztési szilárdság megakadályozza-e a leesést.

#### **Különböző típusú, specifikációs termékek figyelmének használata:**

1. A hegeszthető élírányú bukkális csőnek nincs előre beállított szöge, és az alapja sima, ezért rá kell hegeszteni a szalagokra, és a fogszabályozó ívhuzalokra különféle hurkokat kell meghajlítani, hogy minden fog a megfelelő helyzetbe kerüljön, és szög.
2. A hegeszthető Roth & MBT buccal tubusnak előre beállított szöge van, és az alapja sima, ezért rá kell hegeszteni a szalagokra, de nincs szükség a hurkok hajlításának szükségességére, az egyik íves huzal az alapformával minden fogat megtehet hogy igazodjon a helyes pozícióhoz.
3. A rögzíthető élírányú bukkális cső retikuláris szerkezetű, ezért csak közvetlenül a fog arcára kell kötődnie, de nincs meg az előre beállított szöge, ezért megköveteli, hogy a fogorvos hajlítsa meg a hurkot az ívhuzalokon hogy minden fog a megfelelő helyzetben és szögben legyen.
4. A megköthető Roth & MBT buccal cső retikuláris felépítésű, ezért csak közvetlenül a fog felületére kell kötődnie, de az előre beállított szöggel rendelkezik, így eltávolítja a hurkok hajlításának szükségességét, egy ívhuzal az alapforma minden fogat a megfelelő helyzetbe igazíthatja.

#### **Figyelem:**

1. Használat előtt fertőtlenítse.

Normál körülmények között tisztítsa meg vagy törölje le alkohollal, a tisztítás után a szín megváltozása nélkül, és nem befolyásolja a fogsabályozási hatást.

2. Ne fogyasszon kemény ételt a szájüreg használatakor, hogy elkerülje a buccaltube leesését.

3. A termék csak egyszer használható, kérjük, ne használja ismételten.



**Ellenjavallat:**

A rozsdamentes acélra érzékeny embereknek körültekintően kell használniuk.

**Mark:**




A termék csak egyszer használható, kérjük, ne használja újra.

**Megőrzési módszer:** Nem maró gázban, szellőző környezetben tárolva.

**Érvényességi idő:** A termék feltételei 3 év, kérjük, ellenőrizze a gyártási dátumot a csomagoláson.

**Változat:** A / 2

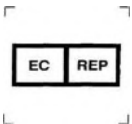


Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10, le Verd, 2595AA,

Hága, Hollandia

E-mail: peter@lotusnl.com

Tel: +31644168999

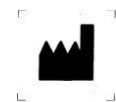

Innovative Material and Devices, Inc

5. épület, No.615, Fengdeng Road, Jiading District, Shanghai

Tel: 86-21-59156556 Fax: 86-21-59156686

www.imdmedical.com