

Návod k použití ortodontických kleští

Název produktu: Ortodontické kleště

Rozsah použití: používá se k řezání, upínání, ohýbání obloukového drátu nebo ligačního drátu, odstraňování spojovacích konzol, páskových smyček atd. V procesu ortodontického ošetření

Specifikace modelu produktu:

Ortodontické kleště se dělí na dva typy, vykládané a nevykládané. Modely klasifikované podle tvaru hlavy jsou uvedeny v následující tabulce:

Seriál	Modelka	Seriál	Modelka
1	Koncové štípací kleště	22	Tři kleště na zobák
2	Koncové štípací kleště s dlouhou rukojetí	23	Kleště na řezání silného drátu
3	Kleště na stříhání vláken	24	Kleště ve tvaru V.
4	Koncové štípací kleště s dlouhou rukojetí	25	Trapézové půlměsíční kleště
5	Koncové štípací kleště	26	Kleště na utahování točivého momentu
6	Kleště tvořící vlákna	27	Multifunkční kleště
7	Kleště na řezání pásky tvořící vlákna	28	Kleště na odvíčkování bukální trubice
8	Malé kleště na sluneční měsíc	29	Dělicí kleště
9	Upínací kleště s hákem zdarma	30	Oboustranné kleště na moment
10	Kleště pro demontáž držáku	31	Jednohlavé kleště na krouticí moment
11	Kleště pro demontáž držáku s dlouhou hlavou	32	Svislé kleště
12	Kleště pro odstranění	33	Horizontální kleště

	zadního držáku		
13	Kleště KIM	34	Kleště na slzy
14	Kleště na odstranění kroužků	35	Děrovací kleště (6 mm)
15	Dlouhé kleště na odstranění kroužku čelenky	36	Děrovací kleště (3 mm)
16	Ukončete ohýbací kleště	37	Držák pinzety
17	Lichoběžníkové kleště	38	Kleště na bukální trubici
18	Horovy kleště	39	Kleště na držení jehly
19	Kleště na odstranění pojiva	40	Tvářecí kleště s kroužkem
20	Kleště na ohýbání niklu a titanu	41	Speciální kleště na tažný hák
21	Vertikální ohýbací kleště	42	Svorka

struktura produktu:

Obvykle se skládá ze zobáku kleští, kloubů a rukojeti kleští. Čelisti kleští mohou být vyrobeny do různých tvarů podle účelu a jsou obvykle vyrobeny z nerezové oceli. Poskytováno nesterilní.

Výkon produktu:

Ortodontické kleště jsou klinické pomocné nástroje, které lékaři často používají při ortodontické léčbě. Ortodontické kleště lze použít k ohýbání nebo řezání drátů ortodontického oblouku, odstraňování lepených konzol nebo poutek a umístění gumiček nebo volných háků.

Kontraindikace:

Ne.

Instrukce

1. Ortodontické kleště musí používat profesionálně vyškolení zubaři;
2. Po vybalení musí být nový produkt dezinfikován. Doporučenou dezinfekční metodou je tlaková sterilizace párou, tj. Teplota je 132 až 134 ° C a doba je 4 minuty.

Opatření:

Před a po použití dezinfikujte ortodontické kleště, abyste zabránili křížové infekci.

Ujistěte se, že je povrch přístroje suchý. Dlouhodobá eroze vlhkostí způsobí problémy, jako je změna barvy a rezivění těla svorky.

Pokud na povrchu ortodontických kleští najdete otřepy, praskliny atd., Měli byste jej přestat používat.

Pokud jsou ortodontické kleště s čepeli po určitou dobu používány, pokud se otupí, přestaňte je používat.

Je určen pro ortodontické použití pouze pro ortodontisty. Neúmyslné použití je zakázáno.

Pokyny pro údržbu

Ke sterilizaci před a po použití použijte vakuový parní sterilizátor a nedotýkejte se korozivních látek.

Podmínky skladování


Mělo by být skladováno při pokojové teplotě, relativní vlhkost není vyšší než 80%, žádný korozivní plyn a dobře větraná místnost.

Záruční lhůta:

Na ortodontické kleště je poskytována záruka po dobu pěti let od data opuštění továrny za podmínky dodržování pravidel skladování, přepravy, skladování a používání. Datum výroby a číslo výrobní šarže jsou uvedeny na štítku obalu.

Datum kompilace: 18. listopadu 2019 Číslo verze: A / 0 2019

Označit:

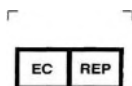

Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10, le Verd, 2595AA,

The Hague, Netherlands

E-mail: peter@lotusnl.com

Tel: +31644168999



Innovative Material and Devices, Inc

Building #5, No.615, Fengdeng Road, Jiading District, Shanghai

Tel: 86-21-59156556 Fax: 86-21-59156686

www.imdmedical.com

Když společnost předloží specifikaci produktu a vzorek vzorku štítku minimální prodejní jednotky, přijme následující závazky:

Společnost slibuje, že bude dodržovat příslušné požadavky „Oznámení o věcech týkajících se podávání zdravotnických prostředků třídy I“ (oznámení č. 26, 2014) Státního úřadu pro kontrolu potravin a léčiv ohledně „Příručky k výrobkům a vzorů vzorků minimálních prodejních jednotek štítků“, Označte číslo záznamu v příručce a štítku zdravotnického zařízení.

Společnost slibuje: Příručka zdravotnického zařízení a design štítku jsou v souladu se

zákony a předpisy.

Innovative Material and Devices, Inc.
18. října 2019